



WeGo

Manual de usuario de WeGo





FABRICADO POR IBELIEVE SPORTS LTD
PARA JAMES LECKEY DESIGN LTD

TEL: + 44 (0) 28 9260 0750

MODELO: PUSHCHAIR WEGO

MES Y AÑO DE FABRICACIÓN: 2018/11

IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS: ISO 7176

**NOMBRE COMERCIAL REGISTRADO
Y DIRECCIÓN JAMES LECKEY DESIGN
LIMITED**

19C BALLINDERRY ROAD, LISBURN
BT28 2SA, UNITED KINGDOM

TEL: + 44 (0) 28 9260 0750

MODELO: PUSHCHAIR WEGO

MES Y AÑO DE FABRICACIÓN: 11/2018

IMPLEMENTACIÓN DE NORMAS: ISO 7176



ADVERTENCIA:

Para evitar lesiones graves por caídas o resbalones, siempre use el arnés del asiento. Nunca deje al niño desatendido. **Importante:** Guarde estas instrucciones para referencia futura. La seguridad de un niño es su responsabilidad. Esta sillita es adecuada para un niño.

ADVERTENCIA: Este asiento no es adecuado para niños menores de 6 meses.

**CUMPLE CON LA BS 1021- PARTE
1: REGULACIONES DE SEGURIDAD
2014 RESPECTO A LA IGNICION
DE CIGARRILLOS**



**PRECAUCIÓN:
LOS DESCUIDOS
CAUSAN FUEGO**

El Firefly WeGo es una silla de paseo de poco peso que es completamente plegable y facilita el paseo y las actividades diarias.

CONTENIDO

01 Uso Previsto	p.4
02 Certificación	p.5
03 Advertencias Y Precauciones	p.6
04 Términos de la Garantía	p.8
05 Información de Seguridad	p.9
06 Precauciones y Contraindicaciones	p.11
07 Limpieza y Cuidado	p.12
08 Mantenimiento del Producto	p.12
09 Normas Importantes	p.13
10 Inspección del Producto	p.14
11 Reedición de Productos Firefly	p.15
12 Configuración de su WeGo	p.16
13 Ajustando WeGo	p.22
14 Uso del GoTo Seat con WeGo	p.24
15 Ajuste del arnés de WeGo	p.27
16 Dimensiones de WeGo	p.28

SECCIÓN 01: USO PREVISTO

Uso previsto

La silla de paseo WeGo está destinada a proporcionar movilidad a los niños que no pueden caminar de forma independiente hasta un peso máximo de 30 kg. También es adecuado para niños que requieren apoyo adicional para la parte superior del cuerpo y no pueden sentarse sin ayuda

Indicaciones para el uso

WeGo está indicado tanto para uso prescriptivo como no prescriptivo para niños que requieren niveles leves de apoyo postural o que tienen dificultades para caminar. WeGo es principalmente un dispositivo no prescriptivo disponible directamente para padres o cuidadores. Los usuarios pueden incluir, entre otros, niños no ambulatorios con un trastorno neuromuscular, congénito o cromosómico, lesión de la médula espinal o retraso global en el desarrollo. Por lo general, estas condiciones afectan la capacidad de la persona para sentarse sin apoyo. WeGo está diseñado para ser compatible con GoTo Seat; un dispositivo de asiento portátil fabricado por Leckey y diseñado para proporcionar niveles más altos de apoyo postural a corto plazo a los niños con discapacidad. Para los niños que requieren este nivel más alto de apoyo postural, WeGo indica que requiere un uso adicional del GoTo



Advertencia: El niño debe estar asegurado en el arnés de 5 puntos en todo momento y nunca se le debe dejar desatendido mientras está en la silla de paseo.

Advertencia: Cuando su WeGo está estacionario, recomendamos que el freno esté completamente activado para evitar cualquier movimiento involuntario

Seat. WeGo está diseñado solo para uso a corto plazo y no ofrecerá apoyo postural adecuado a largo plazo para un niño con necesidades adicionales. El dispositivo está indicado para promover la inclusión dentro de la comunidad y ayudar el transporte del cuidador. Debido a la intimidad del cuidado personal asociado con los niños, este producto está diseñado de manera que la piel y los fluidos corporales, incluidas la orina y las heces, puedan entrar en contacto con el dispositivo. Todos los dispositivos se han diseñado teniendo esto en cuenta y se proporcionan instrucciones de limpieza para garantizar que la salud de un niño o un adulto no se vea comprometida.

SECCIÓN 02: CERTIFICACIÓN

Este producto, WeGo, está clasificado como un Dispositivo Médico de Clase I bajo las regulaciones de la UE y del Reino Unido. Como fabricante, James Leckey Design Limited, declara que este producto cumple con el Reglamento de Dispositivos Médicos (2017/745), la Normativa de Dispositivos Médicos del Reino Unido de 2002, la Directiva de Dispositivos Médicos (93/42 CEE) y la normativa EN 12182:2012 sobre Productos de apoyo para personas con discapacidad, requisitos generales y métodos de ensayo.



Aviso al usuario y/o paciente:
Cualquier incidente grave que se haya producido en relación con el dispositivo debe notificarse al fabricante y a la autoridad competente del estado miembro en el que esté establecido el usuario y/o el paciente.



NOTA:

Información general para el usuario.

No seguir estas instrucciones puede resultar en daños físicos, daños al producto o daños para el medio ambiente.

SECCIÓN 03: ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

01 ADVERTENCIA | PELIGRO DE VUELCO

- Nunca deje WeGo en un terreno irregular.
- Nunca deje al niño sin supervisión mientras está sentado en WeGo, por ejemplo, cuando duerme.
- Compruebe siempre que la inclinación, las hebillas de sujeción del GoTo Seat Seat y la capota estén seguros antes de trasladar al usuario a la silla de paseo. Asegure los arneses de 5 puntos o el arnés de 5 puntos GoTo Seat tan pronto como coloque al usuario en la silla de paseo.
- Asegúrese de que el freno esté completamente activado y seguro (“clic” audible).
- Evite colocar bolsas pesadas en las manillas de empuje.
- Compruebe que el cuerpo del cochecito o la unidad del asiento o los dispositivos de sujeción del asiento para el automóvil estén correctamente acoplados antes de su uso.

02 ADVERTENCIA | PELIGRO DE ATRAPADO PARA LOS DEDOS

- Tenga cuidado de que los dedos del operador o del niño no queden atrapados en los espacios entre el asiento y el marco.

03 PRECAUCIÓN | SEGURIDAD DEL OCUPANTE

- WeGo no es adecuado para niños menores de 6 meses.
- Antes de colocar al usuario en WeGo, ajuste el producto en su orientación terapéutica y verifique su estabilidad y que el marco de la silla de paseo esté completamente bloqueado y el freno de estacionamiento esté completamente activado.
- Las transferencias de usuarios dentro y fuera del producto deben realizarse con el equipo y el personal adecuado.
- Asegúrese de que haya suficiente espacio de acceso antes de realizar una transferencia al dispositivo y de que todos los clips y hebillas estén seguros (es decir, las hebillas de sujeción del GoTo Seat Seat). No es aconsejable mover al usuario mientras está sentado o cualquier ajuste del asiento mientras está sentado.
- Asegúrese de que todos los arneses de 5 puntos de los ocupantes estén abrochados y ajustados para sujetar al ocupante de forma segura en su lugar antes de usar WeGo. Nunca deje al niño sin supervisión mientras está sentado en WeGo. Hay un riesgo de estrangulamiento o asfixia si

los usuarios quedan atrapados en partes de la silla de paseo.

- Si el usuario presenta algún tipo de malestar, retírelo del producto lo más rápido posible de forma segura.
- Para evitar lesiones, asegúrese de mantener alejado a su hijo al desplegar y plegar este producto.
- No permita que su hijo juegue con este producto.
- Este producto no es apto para correr o patinar.
- Nunca use esta silla de paseo para más de un niño.

04 PRECAUCIÓN | PELIGRO DE PELLIZCO EN LOS DEDOS

- Tenga cuidado al ensamblar o ajustar la posición de los componentes del asiento para que el usuario o sus dedos no queden pellizcados al colocar los componentes del asiento y apretar los soportes.
- El cuidador no debe tocar ninguna articulación móvil o pivote que no esté bloqueado.
- Tenga cuidado al ensamblar, desplegar y plegar el armazón de la silla de paseo para que los dedos no se pellizquen, igualmente al ajustar la inclinación del respaldo.

05 PRECAUCIÓN | CONTROLES DIARIOS

- WeGo debe revisarse diariamente antes de su uso para garantizar que todos los arneses, asientos y elementos del marco estén bien sujetos.
- Siempre inspeccione visualmente el producto antes de usarlo. En caso de duda, DETÉNGASE. Si sospecha o sabe que el producto o una pieza está defectuoso, DETÉNGASE. Comuníquese con nuestro departamento de servicio al cliente o distribuidor local lo antes posible.

06 PRECAUCIÓN | LIMPIEZA

- Limpiar el producto con regularidad para evitar la acumulación de suciedad. La suciedad acumulada puede desgastar prematuramente los componentes de la tela y fomentar la corrosión del producto. Utilice únicamente limpiadores domésticos no abrasivos y paños húmedos, no utilice agua corriente en la tapicería mientras aún esté unida al producto. Asegúrese siempre de que el producto esté seco antes de usarlo. Consulte la información de Limpieza y Cuidado del manual del usuario.

continuado →

07 PRECAUCIÓN | LIMPIEZA DE LIMPIADORAS / MANGUERAS ELÉCTRICAS

- No use mangueras ni limpiadoras eléctricas en los componentes del marco, el marco no está sellado contra el agua corriente y puede dañarse con la entrada de agua.

08 ALMACENAMIENTO | DE PRECAUCIÓN

- El producto debe mantenerse alejado de todas las fuentes directas de calor, incluidas llamas

desnudas, cigarrillos, calentadores eléctricos y de gas.

09 PRECAUCIÓN | ELIMINACIÓN

- Solo deseche WeGo en un sitio de eliminación de desechos de la comunidad bajo la categoría de reciclaje correcto.

Este producto es adecuado para un niño que no puede sentarse sin ayuda, darse la vuelta y no puede levantarse sobre las manos y las rodillas. Peso máximo del niño: 30 kg

SECCIÓN 04: TÉRMINOS DE LA GARANTÍA

La garantía de WeGo se aplica solo cuando el producto se utiliza de acuerdo con su uso previsto, siguiendo todas las especificaciones del fabricante. Se proporciona una garantía de un año con este producto fabricado por James Leckey Design Ltd.

El producto se nos puede devolver a efectos de la garantía, reparación o reemplazo hasta 12 meses a partir de su recepción. Una vez que se ponga en contacto con nosotros, organizaremos la recogida del producto a nuestro cargo y, una vez devuelto, repararemos o reemplazaremos el producto y se lo devolveremos al cliente en un plazo de 14 días. En todos los casos, es responsabilidad de los clientes asegurarse de que los productos que

se devuelven están adecuadamente empaquetados, preferiblemente en el embalaje original.

Para mayor seguridad, se recomienda usar la correa de sujeción /correa de la muñeca en todo momento para evitar que la silla de paseo se mueva.

- Cuando esté parado, el freno debe presionarse firmemente hasta que se escuche un clic audible. Este clic indica que el freno está completamente accionado.
- Asegúrese de desactivar el freno antes de alejarse. La barra roja debe volver a su posición original para desactivar el bloqueo.

SECCIÓN 05: INFORMACIÓN DE SEGURIDAD

1. Lea siempre las instrucciones del usuario completamente antes de usar.
2. Asegúrese siempre de evaluar la idoneidad del WeGo antes de colocar al niño en él.
3. No se debe dejar a los niños sin supervisión o desatendidos en ningún momento en este producto.
4. El peso máximo del usuario para WeGo es de 30kgs (66lbs). Éste nunca debe ser superado.
5. No modifique WeGo ni utilice componentes que no sean los aprobados por Firefly con WeGo en ningún momento. Esto puede poner a su hijo a riesgo y también invalidar su garantía
6. El WeGo no ha pasado por pruebas de colisión, por lo que no se puede utilizar para el transporte en vehículos motorizados.
7. Esta silla ha sido diseñada para llevar a un niño. No lleve artículos o niños adicionales, excepto como se indica en este manual. El incumplimiento de estas instrucciones puede causar daños a la sillita de paseo y / o hacerla inestable.
8. La sobrecarga o el plegado incorrecto pueden causar daños a la silla de paseo.
9. Si está utilizando el GoTo Seat con WeGo, siempre asegúrese de que esté firmemente asegurado a la silla de paseo sujetando las tres correas negras. Consulte la sección 14 para obtener más información.
10. Tenga mucho cuidado al usar la silla de paseo cuando su hijo esté completamente reclinado, ya que puede aumentar el riesgo de bascular.
11. Levante siempre las ruedas delanteras sobre bordillos o escalones empujando el asidero hacia abajo.
12. El WeGo debe mantenerse alejado de todas las fuentes directas de calor, incluyendo llamas, cigarrillos, calentadores eléctricos y de gas.
13. Esta silla de paseo no es adecuada para correr o patinar.
14. Nunca permita que los niños plieguen, armen o desarmen la silla.
15. Nunca permita que la silla se use como un juguete o permita que los niños lleven a otros en ella.

16. Si tiene alguna duda sobre el uso seguro de esta silla de paseo o si alguna pieza falla, deje de usar el producto inmediatamente y comuníquese con el Servicio de atención al cliente de Firefly en customer.enquiries@fireflyfriends.com



Advertencia: El incumplimiento de estas instrucciones puede poner a usted o al niño en riesgo.

Advertencia: Mantenga la cubierta de plástico alejada de los niños para evitar la asfixia.



SECCIÓN 06: Precauciones y Contraindicaciones

Precauciones

- Deformidades fijas de la columna como escoliosis o cifosis
- Contracturas musculares graves
- Asimetría muscular o esquelética severa, incluida la dislocación de la cadera
- Condiciones progresivas y de pérdida muscular
- Alto riesgo o antecedentes recientes de fracturas óseas
- Alto riesgo de lesiones relacionadas con la presión o llagas abiertas
- Patrones de movimiento fuertes e incontrolados
- Actividad convulsiva mal controlada
- Niños que dependen del uso de gastrostomía endoscópica percutánea
- Inestabilidad médica, incluida la función respiratoria o cardiovascular comprometida
- Dependencia de aparatos de soporte vital de terceros, como tanques de oxígeno
- Discapacidades de aprendizaje significativas y / o problemas de comportamiento.

Contraindicaciones

- El niño tiene menos de 6 meses.

No existen más contraindicaciones asociadas con el uso de WeGo. Todas las precauciones y contraindicaciones se toman a discreción del médico que prescribe o de los padres. Leckey y Firefly recomiendan la presencia de un médico capacitado y experimentado durante toda la evaluación inicial, las instalaciones, las configuraciones y las reemisiones para minimizar el riesgo.

SECCIÓN 07: LIMPIEZA Y CUIDADO

1. La silla de paseo se puede limpiar con agua fría (300) con un detergente suave.
2. El forro es removible y lavable a máquina en agua fría y detergente suave. No secar en secadora.
3. Permita siempre que el producto se seque antes de doblarlo y guardarlo.
4. Limpie el marco con un paño húmedo y detergente suave.
5. No use limpiadores abrasivos en la silla de paseo.

Sugerencia:

Uno de los mejores limpiadores de tapicería a base de agua es muy fácil de hacer en casa. Coloque una taza de agua tibia (no caliente) en un recipiente para mezclar y luego agregue 1/4 taza de jabón biodegradable para lavar platos. Bata con una batidora eléctrica a velocidad media hasta que el líquido se convierta en una espuma espesa. Esta espuma eliminará la suciedad acumulada y la mayoría de las manchas de comida o bebida. No solo es este limpiador, simple de preparar y de bajo costo, también es no tóxico y respetuoso del medio ambiente.

SECCIÓN 08: MANTENIMIENTO DEL PRODUCTO

Para todas las cuestiones relacionadas con el servicio, consulte el sitio web de firefly www.fireflyfriends.com o póngase en contacto con el equipo de Servicios al Cliente de Firefly en customer.enquiries@fireflyfriends.com

SECCIÓN 09: NORMAS IMPORTANTES

1. Tenga cuidado de evitar lesiones en los dedos al desplegar y plegar la silla.
2. Antes de colocar al niño en WeGo, asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén activados.
3. Asegure al niño en el arnés tan pronto como le coloque en la silla de paseo.

Colocación del niño en el GoTo Seat

1. El GoTo Seat debe estar bien sujeto en su lugar para el uso previsto antes de colocar a un niño en el asiento.
2. Asegúrese de que las correas del arnés no obstruyan la colocación del niño en el GoTo Seat. Las correas de los hombros y las correas de soporte laterales deben estar muy flojas.
3. Cierre la hebilla central y ajuste las correas laterales de soporte para asegurarse de que el niño esté seguro en el arnés del asiento.

La longitud de la correa para el hombro debe ajustarse para que se acople a su hijo de manera segura.

4. La longitud de la correa de la ingle se puede ajustar accediendo al

accesorio de ajuste debajo de la cubierta acolchada. En el tamaño 2 de GoTo Seat, la ubicación de la correa de la ingle se puede mover hacia afuera para darle más espacio a su hijo a medida que crece.

Traslado del niño del GoTo Seat

1. Afloje las correas de los hombros y las correas laterales de apoyo.
2. Desbloquee la hebilla central usando el botón de liberación en el arnés.
3. Deslice las correas de los hombros de los hombros del niño y retire suavemente los brazos del niño del arnés.
4. Una vez que las piernas estén seguras, pase los brazos del niño suavemente a través de las correas de los hombros; las correas de los hombros deben estar muy flojas. Asegúrese de que las almohadillas de las correas de los hombros estén sobre los hombros del niño.

SECCIÓN 10: INSPECCIÓN DEL PRODUCTO

Recomendamos que se realicen varias verificaciones del equipo antes de cada uso para garantizar que el producto sea seguro.

1. Revise la tapicería en busca de signos de desgaste.
2. Compruebe que todas las hebillas estén en perfecto estado de funcionamiento.
3. Compruebe que todos los elementos plegables estén seguros y que funcionen correctamente antes de cada uso.
4. Asegúrese de que todos los dispositivos de bloqueo estén asegurados antes de usarlos.
5. Compruebe que los frenos estén en perfecto estado de funcionamiento.



SECCIÓN 11: REEDICIÓN DE PRODUCTOS FIREFLY

Antes de volver a poner en circulación un producto, se recomienda desinfectarlo mediante uno de los siguientes procedimientos:

Nota:

Limpie siempre el producto en primer lugar para eliminar la suciedad acumulada antes de desinfectarlo/ sanarlo.

- Siempre que sea posible, se recomienda el uso de un sistema de desinfección automatizado que se utiliza para cubrir completamente las superficies del producto con un agente desinfectante. Antes del uso del sistema elegido deben consultarse y seguirse las instrucciones del fabricante al pie de la letra.
- Cuando no se disponga de un sistema de desinfección automatizado, todas las superficies del producto{2} [1] deberán limpiarse con toallitas desinfectantes para superficies o con un desinfectante líquido en un paño suave. Los productos adecuados son IPA al 70%, alcohol al 70% o lejía diluida. Deben seguirse las instrucciones del fabricante del producto elegido. La tapicería y los componentes de tela del producto deben limpiarse

a fondo de acuerdo con la sección de Información sobre limpieza y cuidado, de este manual.


Asegúrese de que se ha suministrado una copia del manual del usuario con el producto. En caso de duda sobre el uso seguro continuado.

En cuanto a su producto Firefly de Leckey o si alguna pieza falla, deje de usar el producto y contacte a nuestro equipo de atención al cliente de Firefly lo antes posible en:

customer.enquiries@fireflyfriends.com


SECCIÓN 12: CONFIGURACIÓN DE SU WEGO

1. Abra el marco del WeGo tirando hacia arriba del manillar y colocando su pie en el tubo del eje trasero como se indica. **A**
2. Levante el asa **B** hasta que escuche un clic, esto indicará que el marco está abierto y bloqueado. **C**
3. Asegúrese de que los bloqueos de seguridad estén engranados.
4. Para colapsar tirar de las palancas de bloqueo en ambos lados hacia arriba. **D**

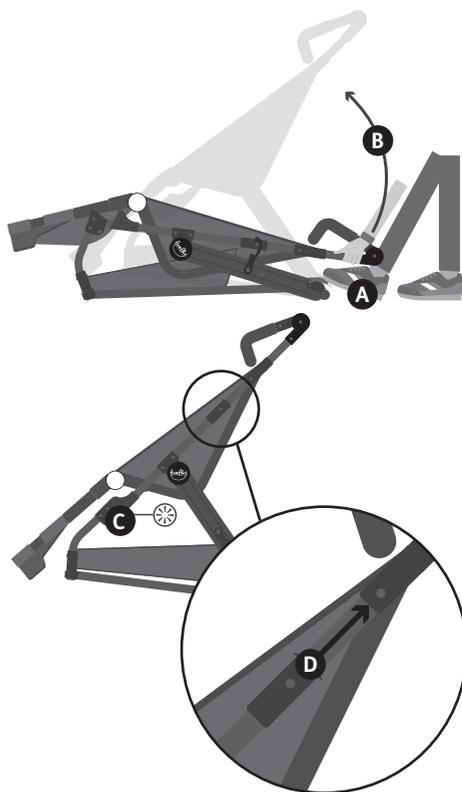

12.1 – ENSAMBLAJE DE LA RUEDA TRASERA



1. Levante el tubo del eje trasero de la silla de paseo e inserte el eje de la rueda trasera hasta que escuche un clic, esto indicará que la rueda está bloqueada en su posición. Repita para la segunda rueda.
2. Asegúrese de que las ruedas estén correctamente instaladas antes de usar el WeGo. Para inspeccionar, tire de la rueda para asegurarse de que está bloqueada en posición.

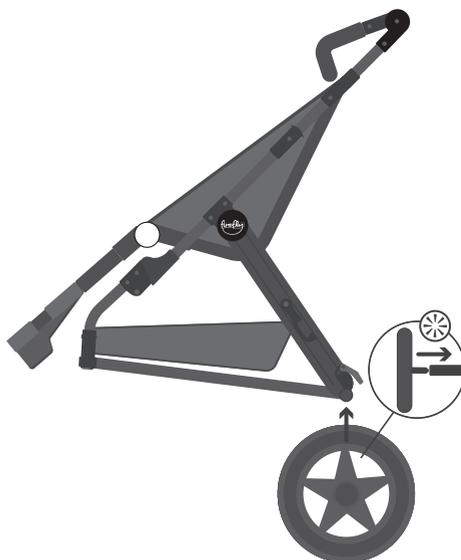

12.2 – MONTAJE DE LA RUEDA DELANTERA

1. Levante el tubo del eje delantero de la silla de paseo e inserte el eje de la rueda delantera hasta que escuche un clic, esto indicará que la rueda está bloqueada en posición. Repita para la segunda rueda. **A**
2. Asegúrese de que las ruedas estén correctamente instaladas antes de usar el WeGo. Para inspeccionar, tire de la rueda para asegurarse de que esté bloqueada en posición.
3. Para bloquear las ruedas delanteras en posición, alinéelas en una posición recta hacia adelante y deslice la guía de bloqueo de las ruedas delanteras hacia abajo. **A**
4. Para desbloquear las ruedas delanteras, deslice la guía de bloqueo de las ruedas delanteras hacia arriba.

Escuchará un clic audible que indica que el freno está completamente accionado.

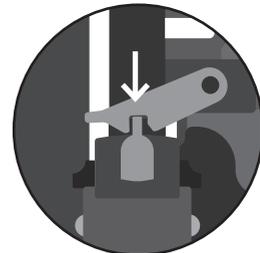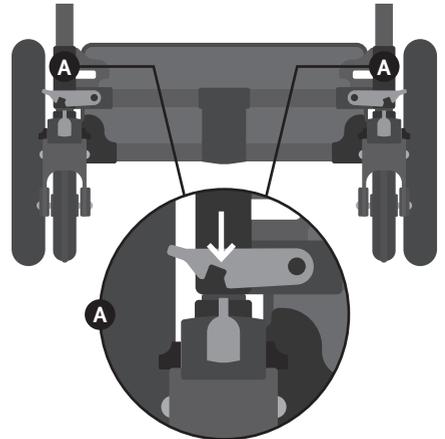

12.3 – USANDO EL FRENO

1. Para activar el freno, presione el pie hacia abajo en la barra de freno roja hasta que las ruedas estén bloqueadas.
2. Para liberar el freno, tire de la barra de freno roja hasta la posición original.


12.4 – AJUSTE DEL MANILLAR

1. Para ajustar el manillar, presione los botones negros en el interior del montaje del manillar para ajustar el manillar a la posición preferida. **A**




SECCIÓN 12.5 – FIJANDO LA CUBIERTA

1. Fije la clavija de plástico a la silla deslizando la en el accesorio que se muestra. **A**

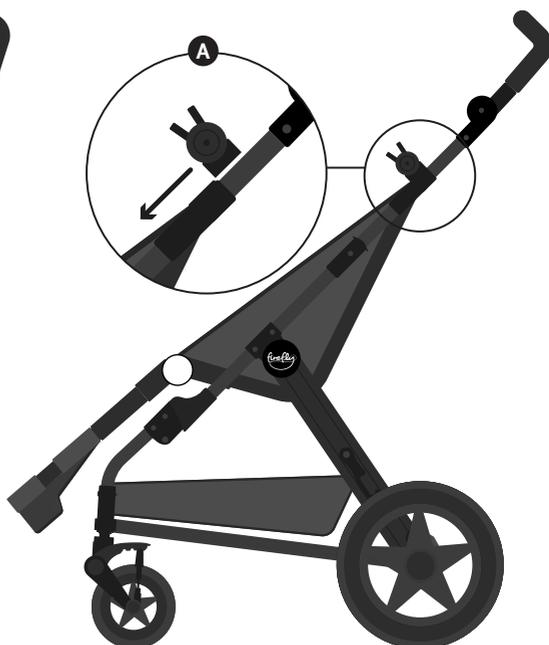

2. Pase las varillas de plástico a través del material de la cubierta como se muestra en la imagen.

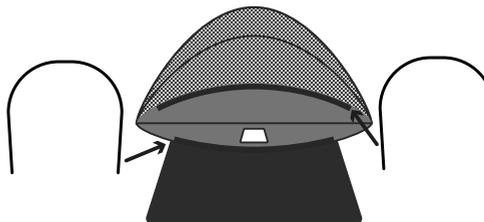

Continuando →

3. Inserte las varillas en los dientes de plástico en ambos lados de la silla y empuje hacia abajo. **B**
4. Coloque los elásticos negros alrededor de los ganchos en la parte posterior del armazón de la silla.
5. Conecte el velcro en el capó para asegurarse de que esté seguro. **C**



SECCIÓN 12.6 – COLOCACIÓN DE LA CUBIERTA CONTRA LA LLUVIA

1. Comenzando con el reposapiés, tire de la cubierta para la lluvia por encima de la silla y tire hacia arriba sobre el capó y hacia abajo de la parte posterior del WeGo.
2. Tire de las aletas por el lado de la silla y asegúrelas dentro del marco. **A**
3. Coloque los elásticos negros alrededor de los ganchos en la parte posterior del marco de la silla. **B**

Importante consejo – Para poner el respaldo en posición totalmente vertical, tire de él hacia adelante y apriételo lo más posible antes de colocar la cubierta.




SECCIÓN 12.7 – SUJETANDO EL CUBREPIÉS.

1. Tire del cubrepiés sobre el reposapiés y pase las manetas a través de los anillos a ambos lados de la silla de paseo. **A**



Los niños no deben dejarse sin supervisión o desatendidos en ningún momento en este producto.

Por favor, asegúrese de que todas las piezas de ajuste de los cubrepiés estén lejos del niño.

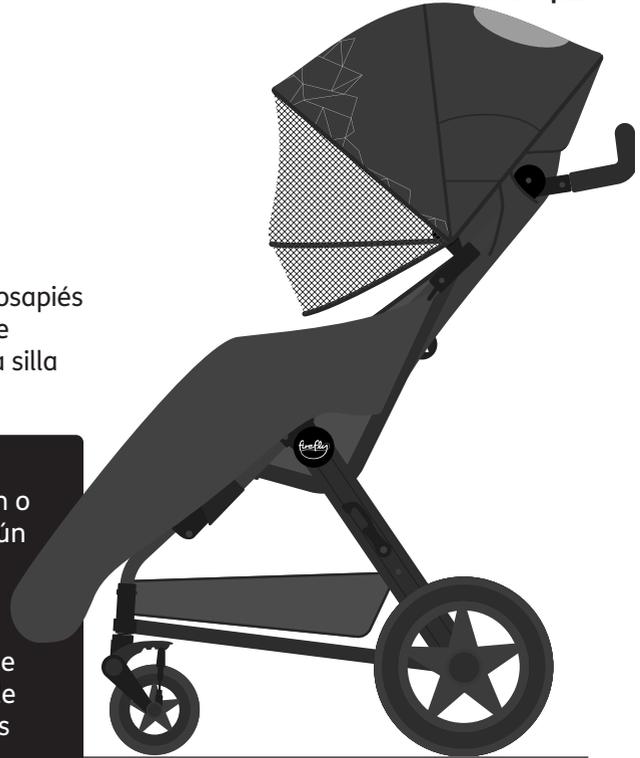

SECCIÓN 12.8 – COLOCACIÓN DE LA MOSQUITERA


1. Coloque el mosquitero sobre el cochecito y fíjelo con las manetas; meta las manetas a través de los anillos a ambos lados del cochecito.



Advertencia: Por favor, solo use bebidas frías en el posavasos.

SECCIÓN 12.9 – COLOCACIÓN DEL POSAVASOS

1. Deslice el posavasos en la fijación del lado derecho del marco de la silla de paseo.

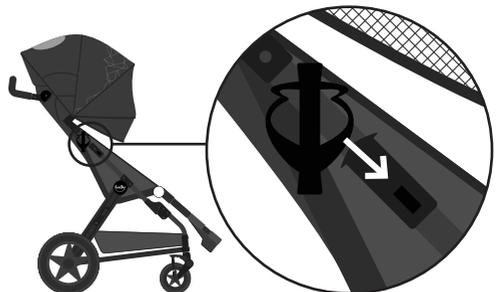

SECCIÓN 13: AJUSTANDO EL WEGO

13.1 – AJUSTE DEL RESPALDO



1. Para ajustar el respaldo hacia atrás, tire de la palanca de plástico gris hacia usted hasta el ángulo que prefiera. **A**
2. Para ajustar el respaldo a una posición vertical, tire de los anillos de plástico gris D a su ángulo preferido. **B**
3. Para colocar el asiento en posición totalmente vertical, empuje el respaldo hacia arriba más allá del marco y apriete tirando de los anillos de plástico D.



Ángulo del asiento al respaldo **100°**

Reclinación total **140°**


Ángulo sentado **15°**

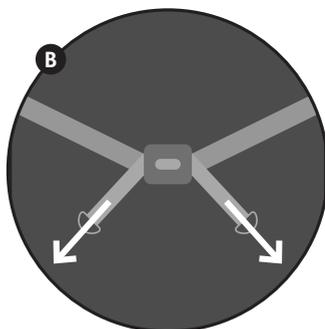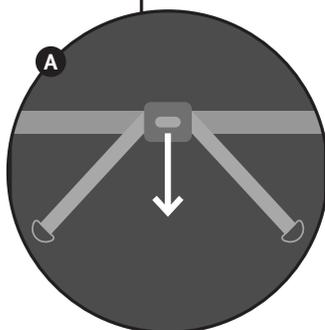


Advertencia: nunca intente ajustar el WeGo cuando un niño ocupa el asiento

13.2 – AJUSTE DEL REPOSAPIÉS

1. Para fijar el reposapiés en el ajuste más corto, empuje hacia arriba hasta el tope y asegure la pieza superior a cada lado de la tela. Por favor, asegúrese de que estén completamente seguros.

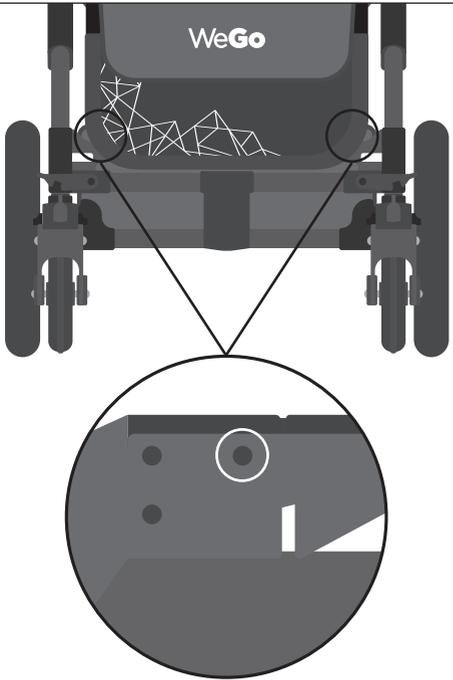

2. Para fijar el reposapiés en la configuración más larga, suelte los corchetes y tire hacia abajo hasta que el pasador de bloqueo haya hecho clic y los corchetes inferiores en cada lado.

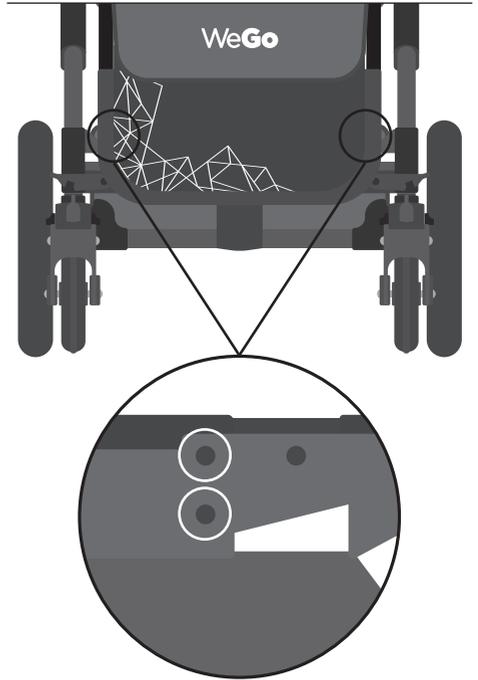


3. El reposapiés puede inclinarse al ángulo preferido presionando el botón blanco en la bisagra lateral del reposapiés.




SECCIÓN 14: USO DEL GOTO SEAT CON EL WEGO


1. Asegúrese de que todas las correas del GoTo Seat estén sueltas y no estén unidas entre sí. Coloque el GoTo Seat en la sillita de paseo.

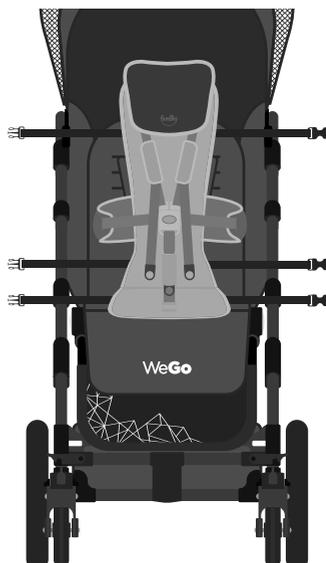

2. Pase las correas a través de las ranuras que se muestran y ajústelas en ambos lados.

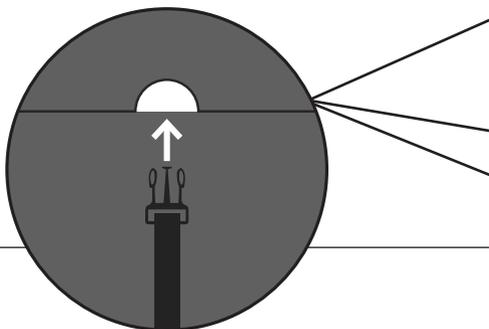

3. Tire de las correas hacia afuera para apretar. **A**
4. Ordene las correas en exceso en los anillos y asegúrelas en los clips. **B**
5. Asegúrese de que todas las correas negras estén bien sujetas alrededor de la silla y que la hebilla de cinco puntos en la parte delantera está desabrochada antes de colocar al niño en el GoTo Seat.

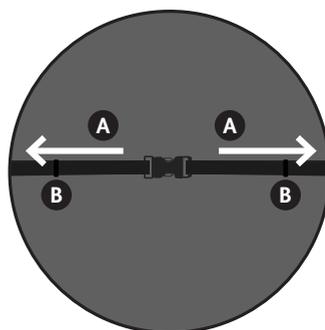


SECCIÓN 14.1: ABRIR Y CERRAR LA HEBILLA DE 5 PUNTOS

Antes de comenzar, asegúrese de que las correas del soporte lateral del hombro y las de la ingle estén sueltas y sin sujetar.


Fije las dos sujeciones de los soportes laterales a los lados de la hebilla del punto medio. **A**

Una vez sujetas, ajuste las correas de los hombros, las correas de soporte laterales y la correa de la ingle tirando de las correas para apretarlas. **B**

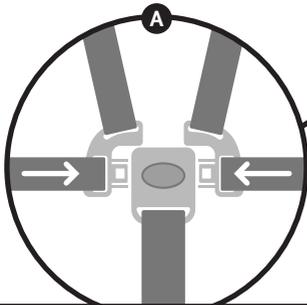

Asegúrese de que las correas no estén torcidas cuando la hebilla esté cerrada

En el tamaño 2 GoTo Seat, la ubicación de montaje de la correa de la ingle se puede mover hacia atrás o hacia adelante para adaptarse a las necesidades de su hijo. Asegúrese de que esté firmemente ajustada a la base de plástico GoTo Seat. **C**

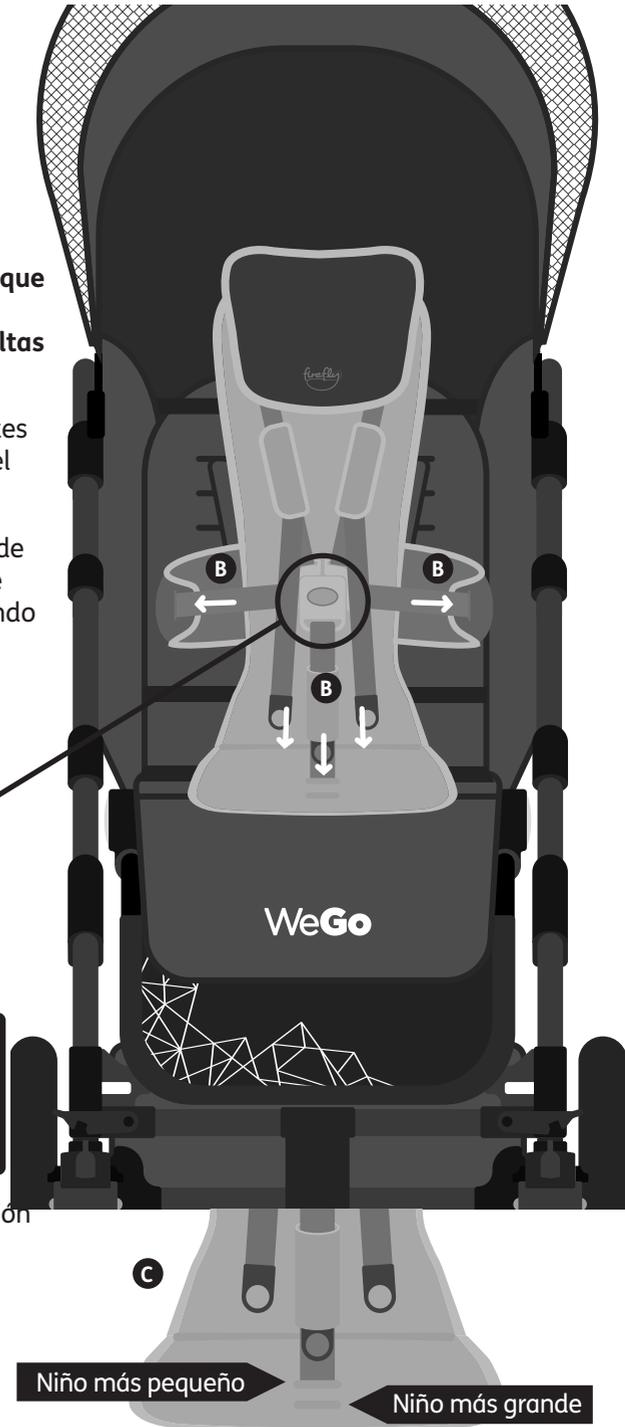


SECCIÓN 14.2: AJUSTE DEL REPOSACABEZAS Y APOYO LATERAL.

Desatornille la perilla en el reposacabezas girando hacia la izquierda para retirar el reposacabezas de la base del GoTo Seat. Mueva el reposacabezas hacia arriba o hacia abajo para lograr la posición deseada. **A**

Una vez que tenga el reposacabezas a la altura deseada, vuelva a atornillar la perilla a la base del GoTo Seat girando hacia la derecha. **B**

Desmonte el soporte lateral girando la perilla girando hacia la izquierda. Mueva el soporte lateral hacia arriba o hacia abajo para lograr la posición deseada. Una vez que tenga el lateral a la altura deseada, asegure el lateral nuevamente girando el mando girando hacia la derecha. **C**

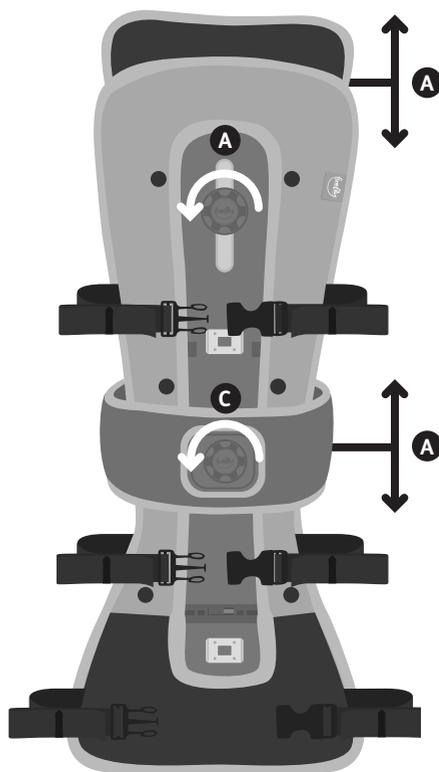


SECCIÓN 15: AJUSTE DEL ARNÉS DE WEGO

Para ajustar las correas de los hombros en el WeGo, deslice la hebilla al final en la parte posterior del respaldo a través de la ranura posterior. **A**

Luego pase la hebilla a través de la ranura de altura deseada. **B**

Puede apretar o aflojar las correas ajustando las hebillas de las correas.

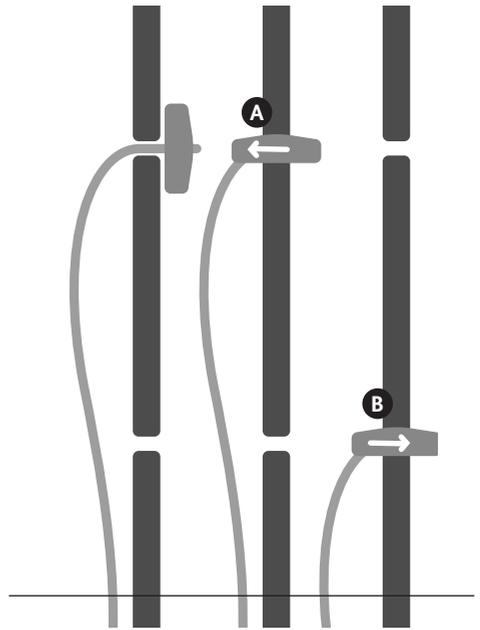

SECCIÓN 16: DIMENSIONES DE WEGO

Longitud de la huella (colapsada)	116cm
Altura de la huella (colapsada)	38cm
WeGo Altura	122cm
Profundidad de asiento	26cm
Altura del asiento	50cm
Ancho del asiento	35cm
Reposapiés de longitud más corta	25cm
Reposapiés Largo Largo	33cm
Peso WeGo	11kg
Peso WeGo con GoTo Seat	13kg

Por favor tenga en cuenta que no todos los niños que usen el GoTo Seat Size 2 serán adecuados para WeGo. Por favor, consulte nuestra guía de tamaños.

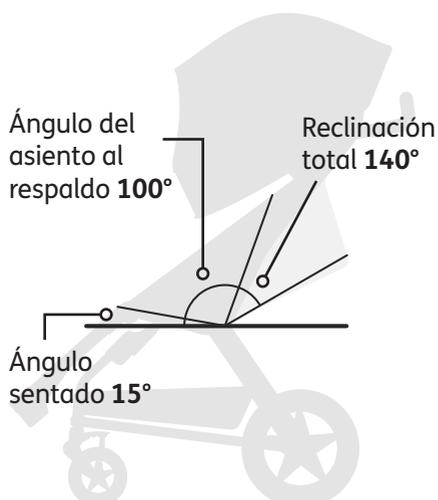


TABLA DE SÍMBOLOS

Símbolo	Significado
	Fabricante
	Peso máx. de ocupación
	Número de modelo
	Número de serie
	Lea las instrucciones de uso
	Marcaje CE
	Dispositivo médico
	Advertencia
	Fecha de fabricación
	No contiene látex
	Identificación única del dispositivo



Fireflyfriends Ltd
19c Ballinderry Road
Lisburn BT28 2SA
Northern Ireland

(+44) 28 9267 8879
hello@fireflyfriends.com

fireflyfriends.com

