




# Splashy

Benutzeranleitung

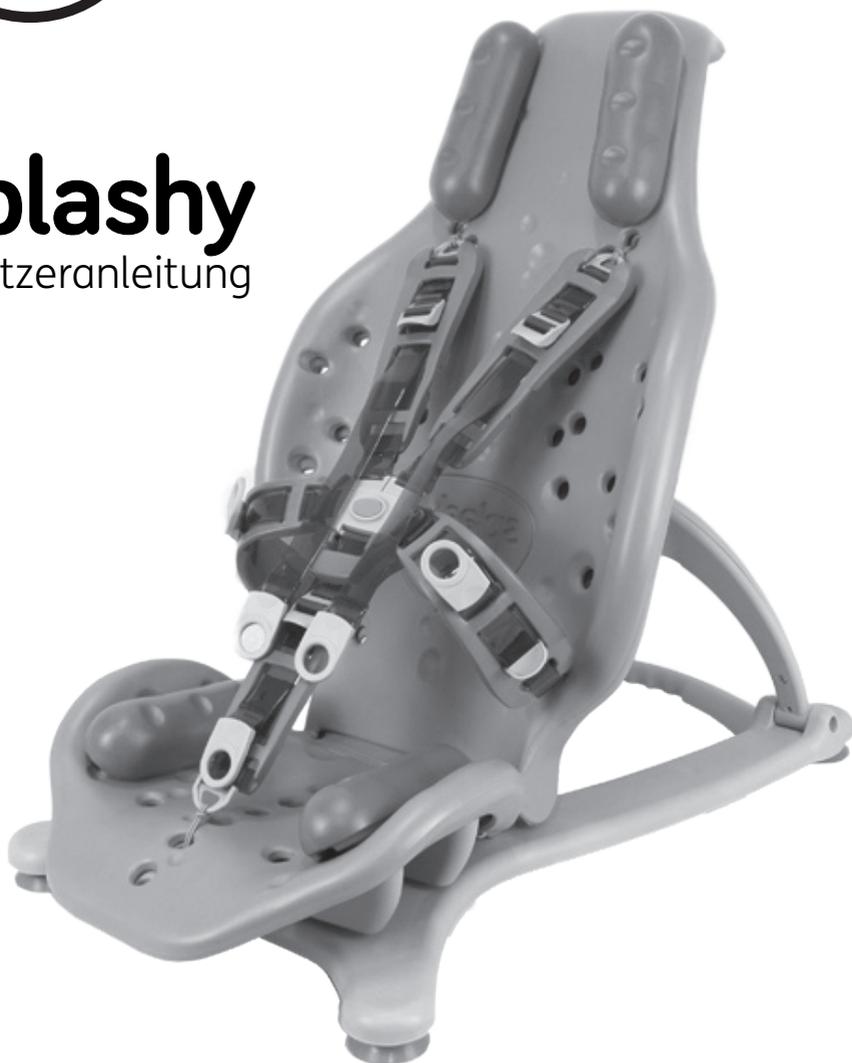

Family Freedom



Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie mit der Nutzung des Splashy beginnen. Sie können diese ebenfalls, nebst Videos, Diagrammen und anderen nützlichen Downloads, unter **[www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com)** herunterladen.

---

## Inhalt

01 Verwendungszweck	p.3
02 Zertifizierung	p.4
03 Warn- Und Sicherheitshinweise	p.5
04 Gewährleistungsbedingungen	p.7
05 Sicherheitsinformationen	p.8
06 Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen	p.9
07 Reinigungs- und Pflegehinweise	p.10
08 Produktprüfung und Reparatur	p.12
09 Wichtige Nutzungsrichtlinien	p.12
10 Die Wiederausgabe von Firefly-Produkten	p.13
11 Nutzungsrichtlinien	p.14
12 Größeninformationen	p.34
13 Tabelle der Symbole	p.35

---

# Abschnitt 01: Verwendungszweck

## Verwendungszweck

Die Badehilfen sind zur Unterstützung von Kindern und jungen Erwachsenen gedacht, die leichte bis komplexe Haltungsprobleme aufweisen, wodurch ihre Sitzfähigkeit ohne externe Unterstützung beeinträchtigt wird. Alle Geräte sind für die Verwendung in einer Badewanne oder Dusche vorgesehen, um die Körperpflege zu erleichtern. Splashy kann zusätzlich im Freien zu Erholungszwecken verwendet werden, wie beispielsweise am Strand oder in einem Wasserpark.

## Indikationen

Splashy ist zur Unterstützung von Kindern mit Behinderungen gedacht, die beim Baden eine Kopf- und Rumpfunterstützung benötigen. Für die Struktur, die Sicherheit und den Halt gilt es als unerlässlich, dass Splashy immer an der Bodenstation befestigt wird. Splashy wurde für Kinder im Alter von 1 bis 8 Jahren und mit einem maximalen Benutzergewicht von 30 kg (66 lbs) entworfen.



**Kinder sollten unter keinen Umständen unbeaufsichtigt im Splashy gelassen werden, da sie sonst ertrinken oder sich verletzen könnten.**

Wir empfehlen, das Produkt vor der Nutzung, entsprechend der Anleitung

in Abschnitt 08, zu prüfen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten. Im Falle, dass das Produkt außerhalb des dafür bestimmten, sicheren Gebrauchs verwendet wird, können Firefly Friends Ltd. und James Leckey Design Ltd. keine Verantwortung übernehmen. Sollten Sie etwaige Zweifel haben, nehmen Sie bitte telefonisch Kontakt mit dem Kundenservice von Firefly auf: Vereinigtes Königreich: +44 (0)800 318265 oder Irland: +353 1800 626020.

Folgende Aktivitäten wurden von Firefly by Leckey für die tägliche Nutzung getestet und anerkannt:

1. In Badewanne oder Dusche
2. Für etwaige Wasserspiel-Aktivitäten

---

**Die Nutzung des Splashy außerhalb des Badezimmers (beispielsweise im Garten oder am Strand) sollte vorab wohl überlegt sein. Beachten Sie, dass die Floorsitter-Splashy-Verbindung durch kleine Partikel und/oder Rückstände (wie z. B. Erde, Graß oder Sand) beeinträchtigt oder beschädigt werden kann. Falls der Splashy mit jedweden Substanzen in Berührung kommt, die die Funktion der Floorsitter-Splashy-Verbindung beeinflussen könnten, spülen Sie diesen bitte nach der Nutzung gründlich ab (siehe Abschnitt 05 für Sicherheitsinformationen und Abschnitt 07 für weitere Reinigungs- und Pflegehinweise).**

## Abschnitt 02: Zertifizierung

Splashy ist nach den Vorschriften der EU und Großbritanniens als ein Medizinprodukt der Klasse I eingestuft. James Leckey Design Limited erklärt als Hersteller, dass dieses Produkt mit der Medizinprodukte-Verordnung (2017/745) der EU, UK Medical Device Regulations 2002 (Britische Medizinprodukte-Verordnung), sowie mit Richtlinie 93/42 EWG über Medizinprodukte und EN 12182:2012, Technische Hilfen für behinderte Menschen – Allgemeine Anforderungen und Prüfverfahren, konform ist.

### **Hinweis für den Anwender und/oder den Patienten:**

**Alle im Zusammenhang mit dem Produkt aufgetretenen schwerwiegenden Vorfälle sind dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats, in dem der Anwender und/oder der Patient niedergelassen ist, zu melden.**

### **HINWEIS:**

#### **Allgemeine Empfehlungen für den Benutzer.**

**Wenn diese Anweisungen nicht beachtet werden, kann das zu Körperverletzung, Beschädigung des Produkts oder Umweltschäden führen!**

---

## Abschnitt 03: Warn- Und Sicherheitshinweise

### Warnung Kippgefahr:

- Lassen Sie Splashy niemals auf einem unebenen Boden stehen.
- Vergewissern Sie sich stets, dass die Rückenlehne befestigt ist, bevor der Benutzer in den Splashy transferiert wird, und dass die Fußsicherheitsgurte des Benutzers verwendet werden, sobald der Benutzer darin platziert wurde.
- Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt, während es sich im Splashy befindet

### Vorsicht Tägliche Überprüfungen:

- Splashy ist täglich vor Gebrauch zu überprüfen, um zu gewährleisten, dass alle Gurte und Sitzelemente sicher befestigt sind.
- Führen Sie vor der Benutzung des Produkts stets eine Sichtkontrolle durch. Wenn Sie Zweifel haben, STOPPEN Sie. Wenn Sie vermuten oder wissen, dass das Produkt oder ein Teil defekt ist, STOPPEN Sie. Wenden Sie sich so schnell wie möglich an unseren Kundendienst oder Ihren Händler vor Ort.

### Vorsicht Fingerquetschgefahr:

- Achten Sie bei der Montage oder Positionsverstellung der Sitzkomponenten darauf, dass Ihre Finger beim Positionieren der Sitzkomponenten und beim Festziehen der Halterungen nicht gequetscht werden.
- Die Pflegekraft sollte keine beweglichen Gelenke oder Drehpunkte berühren, die nicht verriegelt sind.

### Warnung Fingereinklemmgefahr:

- Achten Sie darauf, dass die Finger des Bedieners oder des Kindes nicht in den Zwischenräumen zwischen Sitz und Rahmen eingeklemmt werden.

### Warnung insassensicherheit:

- Stellen Sie das Produkt in seine Therapieausrichtung ein und überprüfen Sie seine Stabilität, bevor Sie den Benutzer in das Produkt platzieren.
- Der Transfer des Benutzers in das und aus dem Produkt muss mit geeigneter Ausrüstung und Personal erfolgen.
- Vergewissern Sie sich, dass der Insasse unmittelbar nach dem Transfer mit den Gerätegurten gesichert wird. Achten Sie beim

Verstellen der Rückenlehne nach hinten auf unwillkürliche Bewegungen, die zum Einklemmen zwischen Sitz und Rahmen/Wanne führen können. Lassen Sie das Kind niemals unbeaufsichtigt, während es sich im Splashy befindet.

- Kippgefahr für den Benutzer – wenn die Gurte während der Körperpflege gelöst werden müssen, könnte das Kind abrutschen oder aufgrund der fehlenden Rumpfkontrolle mit dem Gesicht nach vorne kippen.
- Ertrinkungsgefahr bei zurücklehnenen Produkt in eine sehr tiefen Badewanne.
- Wenn der Benutzer irgendeine Form von Stress zeigt, transferieren Sie ihn so schnell und sicher wie möglich aus dem Produkt.

#### **Vorsicht reinigung:**

- Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, um die Ansammlung von Schmutz zu verhindern. Angesammelter Schmutz kann zu einem vorzeitigen Verschleiß der Sitzschale führen und die Korrosion im Rahmen fördern. Verwenden Sie ausschließlich nicht scheuernde Haushaltsreiniger und feuchte Tücher.

#### **Vorsicht bei der reinigung mit hochdruckreinigern/schläuchen:**

- Verwenden Sie keine Schläuche oder Hochdruckreiniger an den Rahmenteilen. Der Rahmen ist nicht gegen fließendes Wasser abgedichtet und kann durch Wassereintritt beschädigt werden.

#### **Vorsicht lagerung:**

- Das Produkt sollte von allen direkten Wärmequellen ferngehalten werden, einschließlich offener Flammen, Zigaretten, Elektro- und Gasheizungen.

#### **Vorsicht bei der inbetriebnahme:**

- Wenn Sie Splashy nach der Lagerung in Gebrauch nehmen, lassen Sie es zunächst an die Umgebungstemperatur akklimatisieren.

#### **Vorsicht bei der entsorgung:**

- Entsorgen Sie Splashy nur in einer kommunalen Mülldeponie unter der richtigen Recycling-Kategorie.

## Abschnitt 04: Gewährleistungsbedingungen

Gewährleistungen für den Splashy greifen nur, wenn das Produkt unter den vom Hersteller angegebenen spezifischen Bedingungen und für den entsprechenden Verwendungszweck eingesetzt wurde. Für dieses Produkt von James Leckey Design Ltd. gilt eine Gewährleistungsfrist von einem Jahr.

Waren können innerhalb der Gewährleistungsfrist, zur Reparatur oder zum Umtausch, innerhalb von 12 Monaten nach Empfang, an uns

zurückgeschickt werden. Sobald Sie mit uns Kontakt aufnehmen, veranlassen wir die Abholung der Waren zu unseren Kosten. Bei Ankunft der Waren werden diese entweder von uns repariert oder umgetauscht. Anschließend schicken wir die Waren innerhalb von 14 Tagen an Sie zurück. In allen Fällen obliegt es dem Kunden, die zurückgeschickte Ware angemessen, vorzugsweise in der Originalverpackung, zu verpacken.

## Abschnitt 05: Sicherheitsinformationen

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch stets die gesamte Anleitung durch.
2. Kinder sollten in keinem Fall in diesem Produkt unbeaufsichtigt bleiben .
3. Lassen Sie ihr Kind während der Nutzung des Splashy am Strand in Wassernähe nie unbeaufsichtigt.
4. Stellen Sie vor der Verwendung des Splashy stets sicher, dass alle Komponenten gemäß der vorliegenden Anleitung montiert wurden. Der Splashy muss in jedem Falle an der Floorsitter-Plattform befestigt werden. Der Floorsitter sollte auf einem soliden, rutschfesten Untergrund stehen. Nutzen Sie den Splashy in keinem Falle auf rutschigem, instabilen Untergrund.
5. Das maximale Nutzergewicht von 30kg darf in keinem Falle überschritten werden.
6. Der Splashy verfügt über Kleinteile, die von Kleinkindern verschluckt werden könnten. Stellen Sie daher vor der Nutzung sicher, dass alle Komponenten, inklusive Knöpfe und Gurte, sicherheitsgemäß befestigt wurden.
7. Der Splashy verfügt über Kleinteile, die von Kleinkindern verschluckt werden könnten. Stellen Sie daher vor der Nutzung sicher, dass alle Komponenten, inklusive Knöpfe und Gurte, sicherheitsgemäß befestigt wurden.
8. Sollten Sie den Splashy in Umgebungen nutzen, die Erde, Sand, Grass oder andere Kleinkomponenten aufweisen, reinigen Sie die Verbindung zwischen dem Splashy und dem Floorsitter nach jeder Nutzung um eine Blockierung zu vermeiden. Für weitere Informationen zur Montage des Floorsitters an den Sitz, lesen Sie bitte Abschnitt 11.2.6 dieser Anleitung.
9. Lassen Sie den Splashy nach jeder Nutzung vollständig trocknen, bevor Sie ihn gewissenhaft verstauen. Der Splashy sollte vor jedweden Hitzequellen, wie z. B. Zigaretten, elektronischen und gasbetriebenen Herden und offenen Flammen ferngehalten werden.
10. Reinigen Sie das Produkt regelmäßig, entsprechend der Anleitungen in Abschnitt 07 dieser Anleitung.
11. Kontrollieren und warten Sie das Produkt regelmäßig, um sicherzustellen, dass es einwandfrei funktioniert. Der Splashy sollte nicht verwendet werden, wenn etwaige Teile beschädigt oder fehlerhaft sind.
12. Bei Zweifeln an der Sicherheit des Splashy oder der Floorsitter-Plattform, oder beim Versagen von Teilen, stellen Sie die Benutzung bitte umgehend ein und nehmen Kontakt mit dem Firefly Kundendienst auf: Vereinigte Nationen: 0800318265 oder Irland 1800 626020
13. Mit dem Splashy gelieferte Werbeartikel sollten niemals unbeaufsichtigt verwendet werden.



Die Nichtbefolgung dieser Anleitungen kann Sie oder Ihr Kind in Gefahr bringen.

## Abschnitt 06: Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen

### Vorsichtsmaßnahmen

- Fixierte Wirbelsäulendeformitäten wie Skoliose oder Kyphose
- Schwere Muskelkontrakturen
- Schwere muskuläre oder skelettale Asymmetrie einschließlich Hüftluxation
- Progressive und Muskelschwundzustände
- Hohes Risiko von Knochenbrüchen in der Vorgeschichte
- Hohes Risiko für druckbedingte Verletzungen oder offene Wunden
- Starke, unkontrollierte Bewegungsmuster
- Schlecht eingestellte Krampfanfälle
- Kinder mit einer perkutanen endoskopischen Gastrostomie (PEG)
- Medizinische Instabilität einschließlich eingeschränkter Atem- oder Herz-Kreislauf-Funktion
- Abhängig von lebenserhaltenden Fremdgeräten wie Sauerstoffflaschen
- Signifikante Lernbehinderungen und/oder Verhaltensauffälligkeiten

### Kontraindikationen

Es gibt keine Kontraindikationen im Zusammenhang mit den Badehilfen. Die Gebrauchsanweisung weist bei allen Produkten darauf hin, dass kein Kind oder junger Erwachsener unbeaufsichtigt im Gerät verbleiben sollte, wenn es in Betrieb ist oder mit Wasser in Berührung kommt.

Alle Vorsichtsmaßnahmen und Kontraindikationen liegen im Ermessen der Eltern oder des/r verordnenden Kliniklers/in.

## Abschnitt 07: Reinigungs- und Pflegehinweise

### Pflegehinweise

- Zur Reinigung des Splashy empfehlen wir die Verwendung von warmem Wasser und scheuermittelfreiem Reinigungsmittel. Nutzen Sie niemals organische Lösungsmittel oder Trockenreinigungsmittel.
- Die Schaumstoffkomponenten des Splashy sind nicht für die Waschmaschine geeignet, da diese an Form verlieren und sich verdrehen könnten.
- Wir empfehlen, die Nutzung von verschreibungspflichtigen medizinischen Badezusätzen im Badewasser, während des Badens mit dem Splashy, zu vermeiden, da diese die Materialien des Splashy beschädigen können.
- Reinigen Sie die Oberfläche der Badewanne vor Rückständen oder Schmutz, bevor Sie die Floorsitter-Plattform anbringen. So können die Gummifüße des Floorsitter gut an der Badewannenfläche haften.
- Zur Entfernung von Erde, Sand, Grass oder anderen kleinen Partikeln, die sich in der Floorsitter-Sitzverbindung befinden können, hilft ein leichtes Klopfen der Verbindung. Spülen Sie die Verbindung ausgiebig, um sicherzustellen, dass sich keine Partikel darin festsetzen. Bei hartnäckigen Festsetzungen am Floorsitter kann das Zurückschnellen des Schnappverschlusses mit dem Daumen Rückstände lockern und entfernen.

- Sollte Ihr Badewannensitz mit Salzwasser in Kontakt kommen, spülen Sie alle Teile sorgfältig mit frischem, sauberen Wasser ab.

### 5-Punkte-Verschlussgurt

Der Splashy 5-Punkte-Verschlussgurt kann abgenommen und mit Seifenwasser gereinigt werden.

---

### Die Floorsitter-Plattform

1. Stellen Sie sicher, dass die Floorsitter-Plattform nach jedem Gebrauch gereinigt wird, um einen optimalen Griff am Badewannenboden zu gewährleisten.
2. Seife und Wasser sind für die tägliche Reinigung geeignet.
3. Verwenden Sie keine Lösungsmittel zur Reinigung der Floorsitter-Plattform.


---

### Splashy Schaumstoff-Sitzbasis, -Rückenlehne und Stützen


1. Seife und Wasser sind für die tägliche Reinigung geeignet.
2. Die EVA Schaumstoffbezüge können abgenommen und regelmäßig gewaschen werden, um Schmutz sowie Rückstände zu entfernen.

**Die EVA Schaumstoffbezüge können abgenommen und alle paar Monate gewaschen werden.**


1. Die EVA-Bezüge werden mithilfe von acht Häkchen befestigt. Zwei an der Rückseite des Sitzes und sechs an der Sitzbasis.
2. Lösen Sie alle Häkchen per Hand (nutzen Sie kein Werkzeug).
3. Verwenden Sie Seifenwasser zur Reinigung.
4. Die Bezüge sollten bei Wiederanbringung vollständig getrocknet sein.
5. Stellen Sie sicher, dass alle Häkchen bei der Wiederanbringung der Bezüge miteinander verbunden sind.

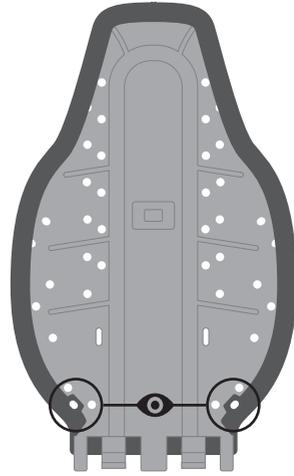

Position der Häkchen

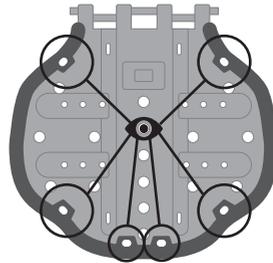

 Nach Verwendung des Splashy außerhalb des Badezimmers (beispielsweise am Strand oder im Garten) sollte dieser immer abgespült werden, um die Festsetzung von Partikeln und eine damit verbundene Einschränkung von Funktionen und Mechanismen des Splashy zu vermeiden. Für weitere die Anleitung zwecks Anschluss der Floorsitter-Plattform an den Sitz lesen Sie bitte Abschnitt 11.2.6

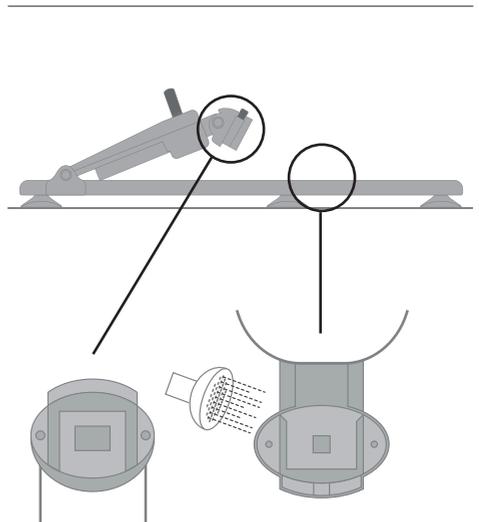

## Abschnitt 08: Produktprüfung und Reparatur

Bevor Sie den Splashy verwenden, empfehlen wir Ihnen diesen zu prüfen, um die Sicherheit des Produktes zu gewährleisten.

Wir empfehlen folgende Schritte zur korrekten Überprüfung:

1. Stellen Sie sicher, dass die Rückenlehne und die Sitzbasis des Splashy sicher miteinander verbunden werden können (siehe Abschnitt 11).
2. Prüfen Sie, ob der Splashy korrekt an der Floorsitter Plattform befestigt werden kann und stellen Sie sicher, dass die Plattform sicher und stabil in der Badewanne steht, bevor Sie das Kind hineinsetzen.
3. Stellen Sie sicher, dass der 5-Punkte-Verschlossgurt sowie die Pufferstützen mithilfe der Knebelknöpfe am Splashy befestigt sind.



Bei Zweifeln an der Sicherheit Ihres Firefly Produktes oder beim Versagen von Teilen stellen Sie die Benutzung bitte umgehend ein. Nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit dem Firefly Kundendienst auf.

4. Prüfen Sie den 5-Punkte-Verschluss und die Pufferstützen auf Schäden oder Verschleiß.

5. Prüfen Sie die Verschlüsse und Knebelknöpfe auf Risse oder Beschädigungen.

Wir stehen Ihnen für alle servicebedingten Belange unter [www.fireflyfriends.com](http://www.fireflyfriends.com) oder [customer.enquiries@fireflyfriends.com](mailto:customer.enquiries@fireflyfriends.com) zur Verfügung.

## Abschnitt 09: Wichtige Nutzungsrichtlinien

Sorgen Sie dafür, dass der Splashy sicher in der Badewanne steht, Für Kinder, die beim Hineinsetzen mithelfen können, stellen Sie die Rückenlehne in die mittlere Position. Siehe hierzu Abschnitt 11.6.

Eine vollständig zurückgeklappte Rückenlehne erleichtert Kindern, die in die Badewanne gehoben werden, das Hineinsetzen.

die Polsterpuffer anzupassen, bevor Sie das Kind in den Sitz setzen. In jedem Falle können diese bei Bedarf nachjustiert werden, sobald Ihr Kind in der Wanne sitzt. Gehen Sie während

der Einstellung des Badewannensitzes vorsichtig vor und achten Sie dabei genau auf Ihr Kind.

Das Hinein- oder Herausheben des Kindes aus der Badewanne ist eine Bewegung, die Ihren Rücken belasten kann. Daher **empfehlen wir Ihnen, sich von Ihrem Therapeuten bezüglich sicherer Hebetekniken beraten zu lassen**. Diese erleichtern Ihnen, Ihr Kind in die Badewanne und wieder heraus zu heben.

## Abschnitt 10: Die Wiederausgabe von Firefly-Produkten

Vor der erneuten Zuteilung eines Produkts wird die Desinfektion mit einem der folgenden Verfahren empfohlen:

Hinweis: Entfernen Sie immer zuerst angesammelten Schmutz, bevor Sie das Produkt desinfizieren.

1. Wenn möglich, empfehlen wir, ein automatisiertes „Nebelsystem“ für die Desinfektion zu verwenden, mit dem alle Oberflächen des Produkts mit einem Desinfektionsmittel behandelt werden. Die Anweisungen des Herstellers des gewählten Systems sind vor dem Gebrauch durchzulesen und genau zu beachten.
2. Wenn kein automatisiertes Desinfektionssystem verfügbar

ist, sollten alle Oberflächen des Produkts mit desinfizierenden Wischtüchern oder mit einem weichen Tuch, das mit einem flüssigen Desinfektionsmittel getränkt wurde, abgewischt werden. Dafür sind folgende Produkte geeignet: IPA 70 %, Alkohol 70 % oder verdünnte Bleiche. Die Anweisungen des Herstellers für das ausgewählte Produkt sind zu beachten. Die Bespannung und Stoffe des Produkts sollten wie im Abschnitt „Reinigung und Pflege“ in diesem Handbuch beschrieben gründlich gereinigt werden.






Stellen Sie sicher, dass eine Kopie des Benutzerhandbuchs mit dem Produkt mitgeliefert wird. Falls Sie jedwede Zweifel an der weiteren sicheren Nutzung Ihres Firefly Produkts haben oder falls irgendwelche Teile versagen, stellen Sie bitte die Benutzung ein und nehmen Sie schnellstmöglich Kontakt mit unserer Kundendienstabteilung auf: Vereinigtes Königreich 0800 318265 oder Irland: 1800 626020.

# Abschnitt 11: Nutzungsrichtlinien

## 11.1 Die Teile des Splashy



Die Splashy-Ente sollte nur unter Aufsicht genutzt werden

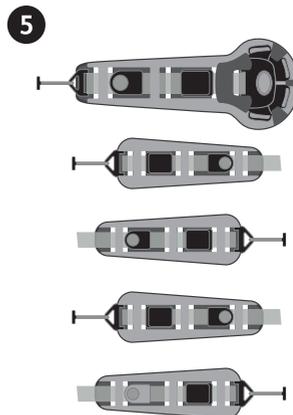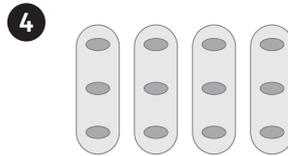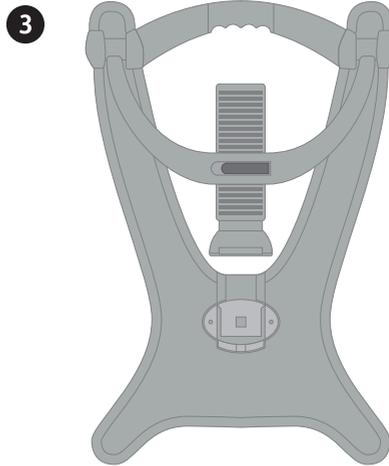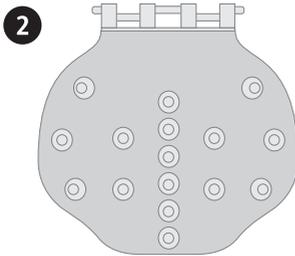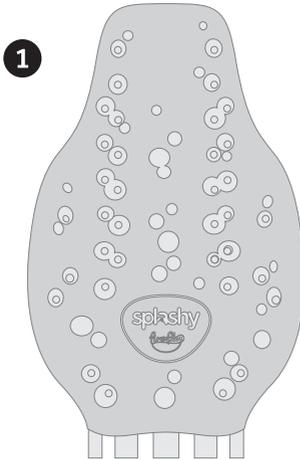

Ihr Splashy wird mit folgenden Teilen geliefert:

- 1 1x Rückenlehne
- 2 1x Sitzbasis
- 3 1x Floorsitter-Plattform
- 4 4x stützende Puffer
- 5 1x Leistenteil & 4x Gurte

## 11.2 Zusammenbau des Splashy



- Wir empfehlen Ihnen, vorab eine Trockenübungsrunde in leichter Kleidung mit ihrem Kind im Splashy zu durchlaufen, um so eine korrekte Platzierung der Gurte und Puffer zu gewährleisten.
- Stellen Sie sicher, dass Ihre Badewanne vor der Platzierung der Floorsitter-Plattform frei von Schmutz und Rückständen ist.
- Ihr Splashy **MUSS VOR** der Befüllung der Badewanne mit Wasser, zusammengebaut sein. Wir empfehlen Ihnen, die Wanne mit einer Mischung aus warmen und kaltem Wasser zu befüllen, um Schäden am Splashy zu vermeiden.
- Siehe Abschnitt 11.6 für weitere Anleitung zur Anbringung des Rückenlehnenarms.

### 11.2.1 Korrekte Platzierung der Floorsitter-Plattform

Die Floorsitter-Plattform sollte ausschließlich auf festem, soliden und ebenmäßigen Untergrund stehen. Beim Platzieren des Floorsitters auf dem gewünschten Untergrund ist es zwingend erforderlich, dass sich alle GummifüÙe in Kontakt mit dem Untergrund befinden.

Die GummifüÙe sind verstellbar und können sich der Form der Badewanne anpassen. Sie verstellen die GummifüÙe, indem Sie diese, entsprechend der gewünschten Einstellung, entweder im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.


Die GummifüÙe können in den schmaleren Bereich des Floorsitter bewegt werden und sich so der Breite Ihrer Badewanne anpassen. Stellen Sie sicher, dass die FüÙe gegenüber voneinander platziert werden.

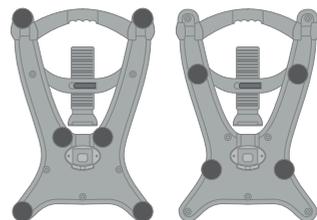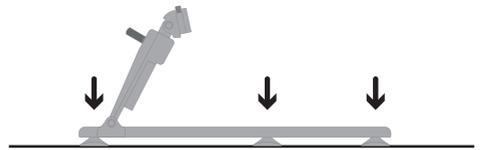

Fortsetzung →

## 11.2.1 Korrekte Platzierung der Floorsitter-Plattform


Stellen Sie, sobald der Floorsitter platziert wurde, sicher, dass der Rückenlehnenarm in höchster Position eingestellt ist.

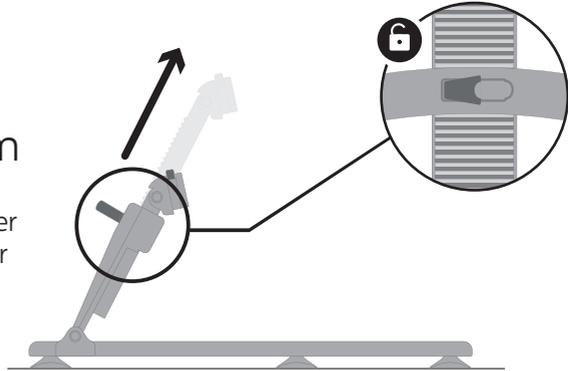

## 11.2.2 Montage des Splashyses

1


Bevor Sie den Splashy am Floorsitter befestigen, sollten sowohl Rückenlehne als auch Sitzbasis montiert sein.

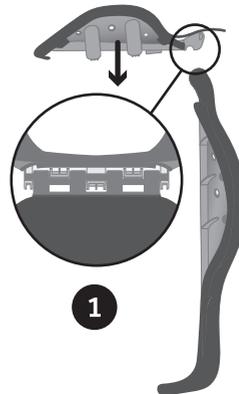

2


Halten Sie die Rückenlehne des Splashy vertikal hoch, sodass sich die Rillen oben befinden. Schieben Sie mit der anderen Hand die Sitzbasis in die Rillen der Rückenlehne.

Drehen Sie die Sitzbasis in die entgegengesetzte Richtung um die Verbindungen einrasten zu lassen. Wenn verbunden, setzen Sie das Schaumstoffscharnier unter den Bezug der Schaumstoff-Rückenlehne.

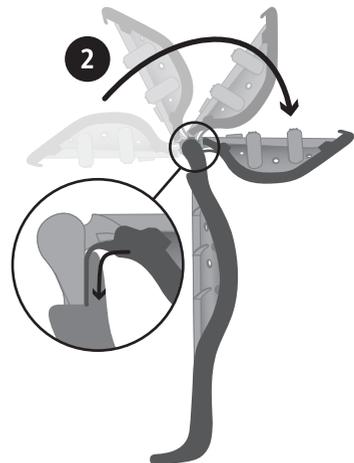


## 11.2.3 Anbringen und Verstellen des Gurtes und der Puffer


- 1 Um Stützstreifen und Puffer an Sitzbasis und Rückenlehne des Splashy anzubringen, drücken Sie den entsprechenden Knebelverschluss durch die Öffnung.
- 2 Zum Verschließen drehen Sie den Knebelknopf unterhalb des Sitzes zur Seite.

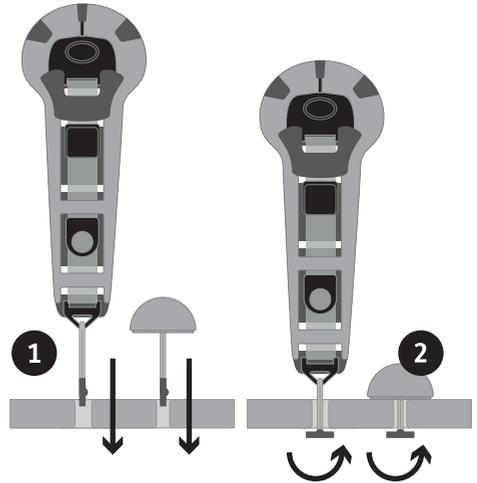

Zur Befestigung der Schulter- und Seitengurte folgen Sie bitte dieser Abbildung.

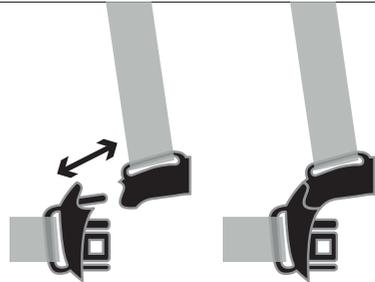


Sie haben die Gurte auf der richtigen Seite des Splashy befestigt, wenn die Schnalle wie folgt aussieht.

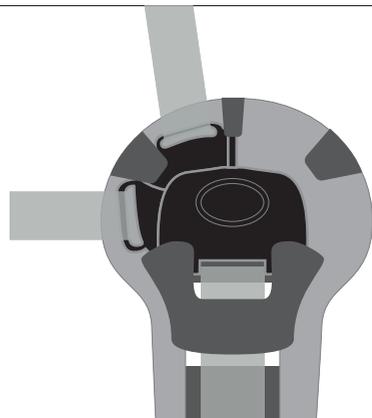


## 11.2.4 Einstellen des 5-Punkte-Verschlussgurtes

- 1 Drücken Sie den Knebelverschluss des Leistenteils durch die Sitzbasis des Splashy.
- 2 Drücken Sie den Knebelverschluss des linken Schultergurtes durch das der korrekten Größe entsprechende Loch.
- 3 Drücken Sie den Knebelverschluss des linken Seitengurtes durch ein Loch an der Seitenwand der Rückenlehne.
- 4 Wiederholen Sie diese Vorgänge mit den Schulter- und Seitengurten auf der rechten Seite.
- 5 Sobald alle Gurte sicher angebracht sind, verbinden Sie diese, mithilfe des Verschlusses, zu einem 5-Punkte-Verschlussgurt.

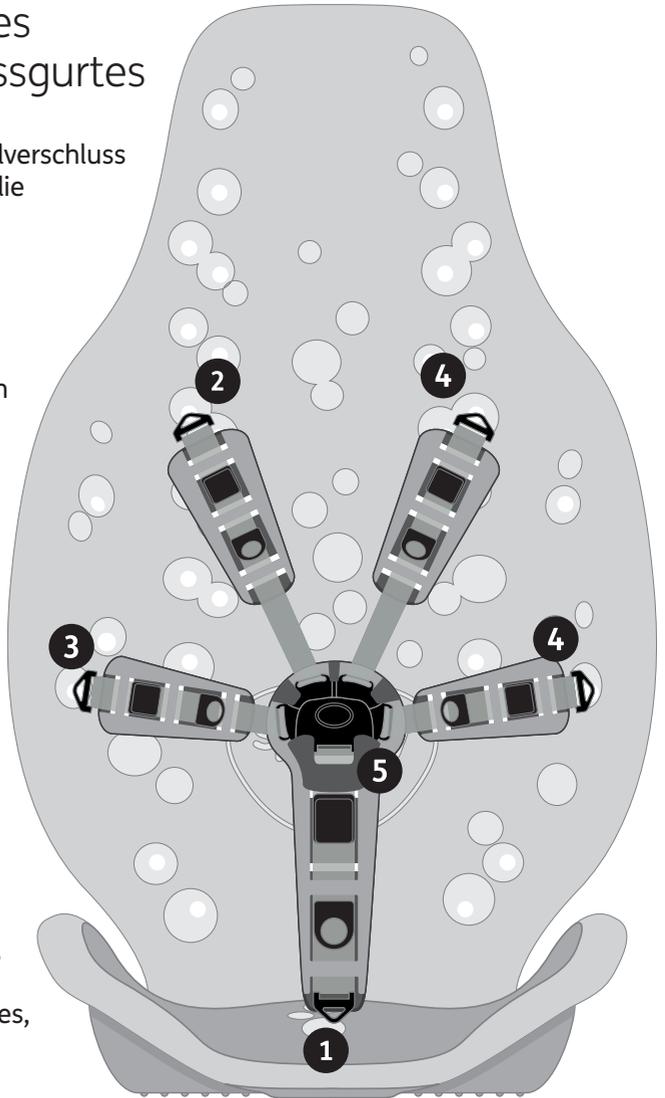


**Tipp** – So bald Sie die Einstellung beendet haben, können Sie den überschüssigen Teil des Gurtes im Schaumstoff des Verschlussgurtes verstauen.

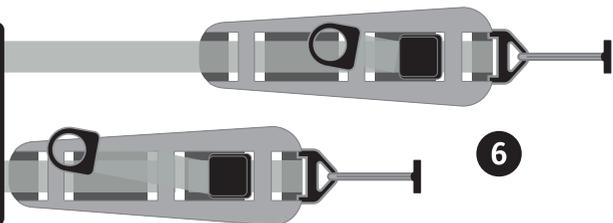

- 6** Mittels Lösen der Klammern können die Gurte flexibel, durch Lockern oder Festziehen, eingestellt werden. Stellen Sie sicher, dass die Klammer bei Abschluss der Einstellung, verschlossen ist.

### 11.2.5 Einstellen des 3-Punkte Verschlussgurts


- 1** Drücken Sie den Knebelverschluss des linken Seitengurtes durch ein Loch an der Seitenwand der Rückenlehne.
- 2** Wiederholen Sie diesen Vorgang mit dem rechten Seitengurt.
- 3** Sobald alle Gurte sicher angebracht sind, verbinden Sie diese, mithilfe des Verschlusses, zu einem 3-Punkte-Verschlussgurt.

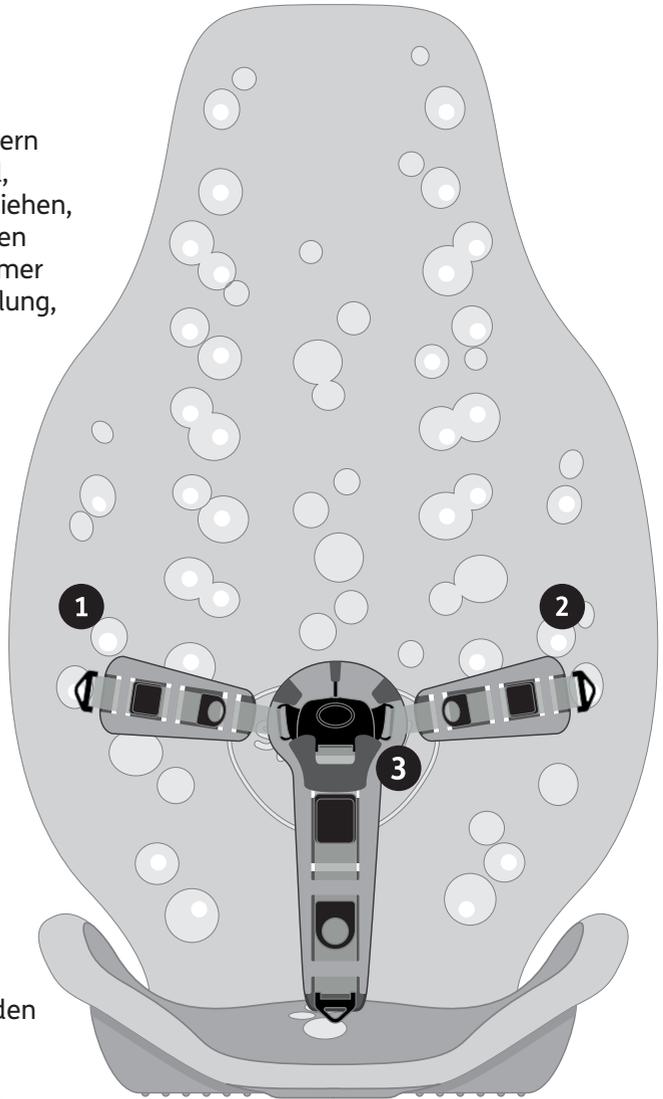


Verstellen Sie den 5-Punkte-Verschlussgurt auf keinen Fall in einen 3-Punkte-Verschlussgurt, während sich das Kind in dem Badewannensitz befindet.

## 11.2.6 Montage des Splashy an die Floorsitter-Plattform

- 1 Stellen Sie den Splashy mit der Sitzbasis auf den Floorsitter.
- 2 Um sicherzustellen, dass der Splashy mittig auf dem Floorsitter ausgerichtet ist, bewegen Sie die Sitzbasis des Splashy leicht vorwärts, sodass diese in den Schließkanal einrasten kann.
- 3 Sobald die Sitzbasis korrekt in den Floorsitter einrastet, hören Sie ein Klicken.

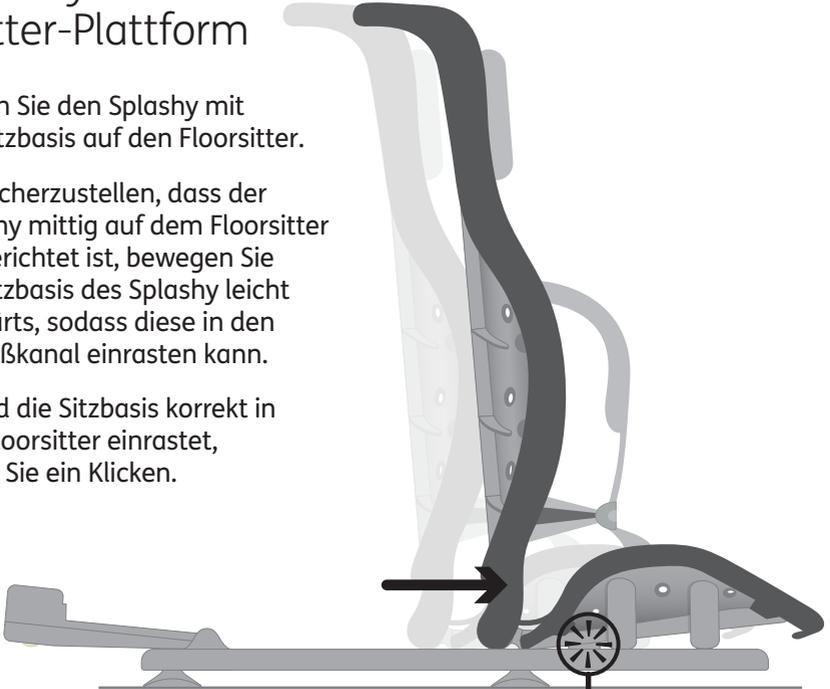


  
 Achten Sie auf ein deutlich vernehmbares Klicken, wenn Sie die Sitzbasis des Splashy mit der Floorsitter-Plattform verbinden.

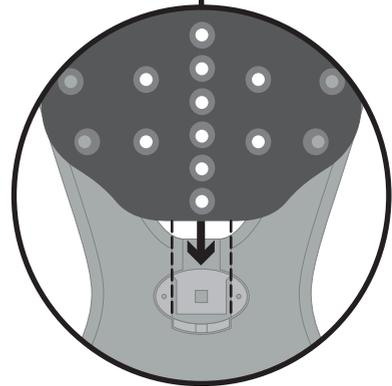

Bevor Sie den Rückenlehnenarm an die Rückenlehne anbringen stellen Sie bitte sicher, dass dieser auf höchster Stufe eingestellt ist.


Während Sie mit einer Hand den Splashy festhalten, drücken Sie mit der anderen den hervorgehobenen Knopf und schieben Sie den Aufsatz in die Rückenlehne.

Bei korrekter Anbringung hören Sie ein Klick.

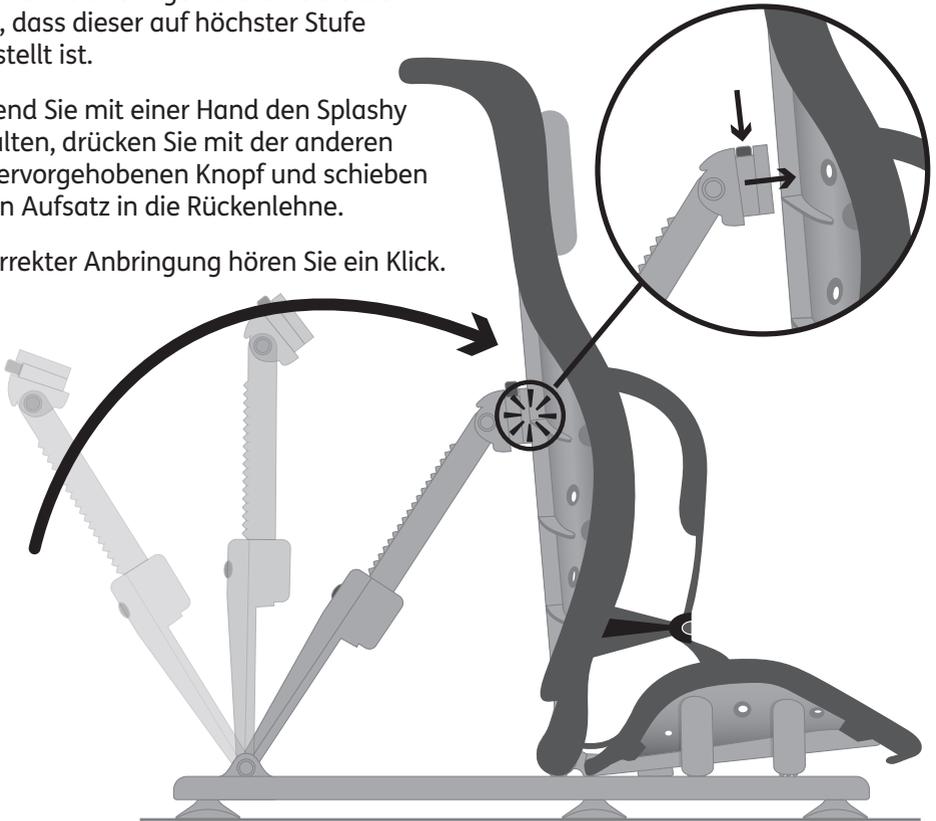

Folgendes Bild zeigt den vollends montierten Badewannensitz.

Sie können Ihr Kind nun in den Splashy setzen.

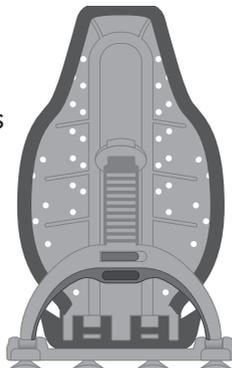


## 11.3 Pufferstützen

So bald Ihr Kind mithilfe des Verschlussgurtes sicher im Splashy sitzt, können Sie zur zusätzlichen Stützung die Puffer befestigen.

Auf diesem Bild dienen die Puffer zur Stützung des Kopfes; diese können aber zudem als Knauf, als Anti-Rutsch-, oder Beinstütze verwendet werden.

Falls Ihr Kind mehr Stützhilfe im Splashy benötigt, können Sie auf unserer Firefly-Webseite, im Bereich Zubehör, weitere Puffer erwerben.

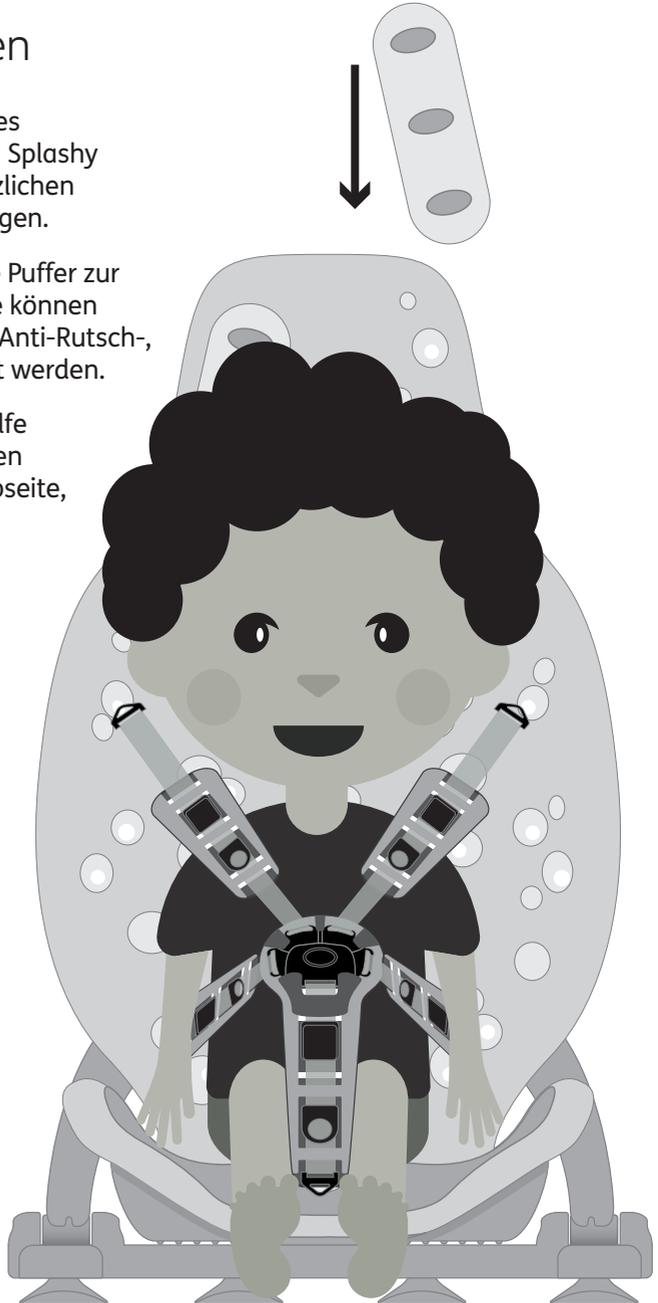


## 11.3.1 Anbringung der Puffer als Stütze an diversen Stellen

Die Puffer können wie folgt verwendet werden:

**1. Als Kopfstütze** – platzieren Sie jeweils einen Puffer an die linke und rechte Seite des Kopfes.




**2. Als Nackenstütze** – platzieren Sie einen Puffer längs an den Nackenansatz.

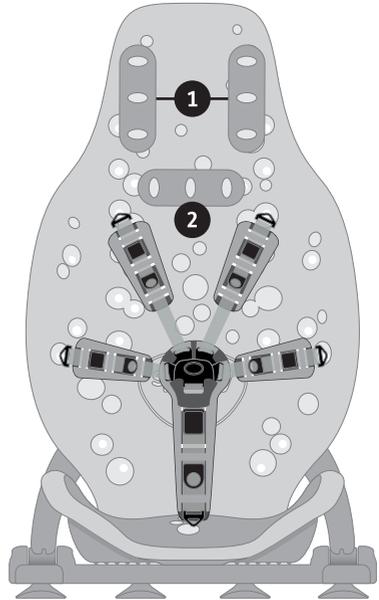

**3. Als Knauf** – platzieren Sie einen Puffer zwischen die Beine Ihres Kindes (um ein Überkreuzen zu verhindern).

**4. Als Beinstütze** – platzieren Sie einen Puffer jeweils an die äußere Seite des rechten und linken Beines (hilft, das seitliche Wegkippen aus dem Badewannensitz zu vermeiden).


**5. Anti-Rutsch-Hilfe** – platzieren Sie einen Puffer längs an die Sitzbasis des Badewannensitzes, vor dem Po Ihres Kindes (hilft dabei, ein Vorrutschen des Kinderpos im Sitz zu vermeiden). Für manche Kinder ist es bequemer, wenn ein Puffer vor dem Leistenteil angebracht ist.

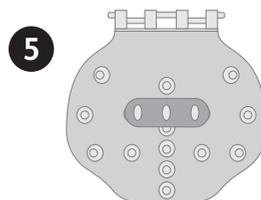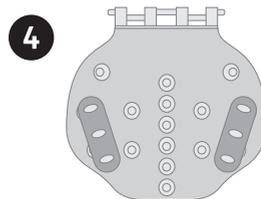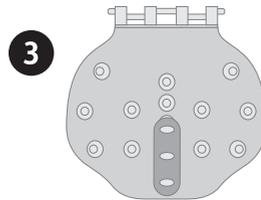

## 11.4 Verstellen der Gurte zur sicheren Wäsche


Stellen Sie für die Wäsche einen 4-Punkte-Gurt ein, indem Sie die Schulterriemen entfernen.

Um den Schulterriemen zu entfernen, lösen Sie den Knebelverschluss von der Rückseite der Rückenlehne.

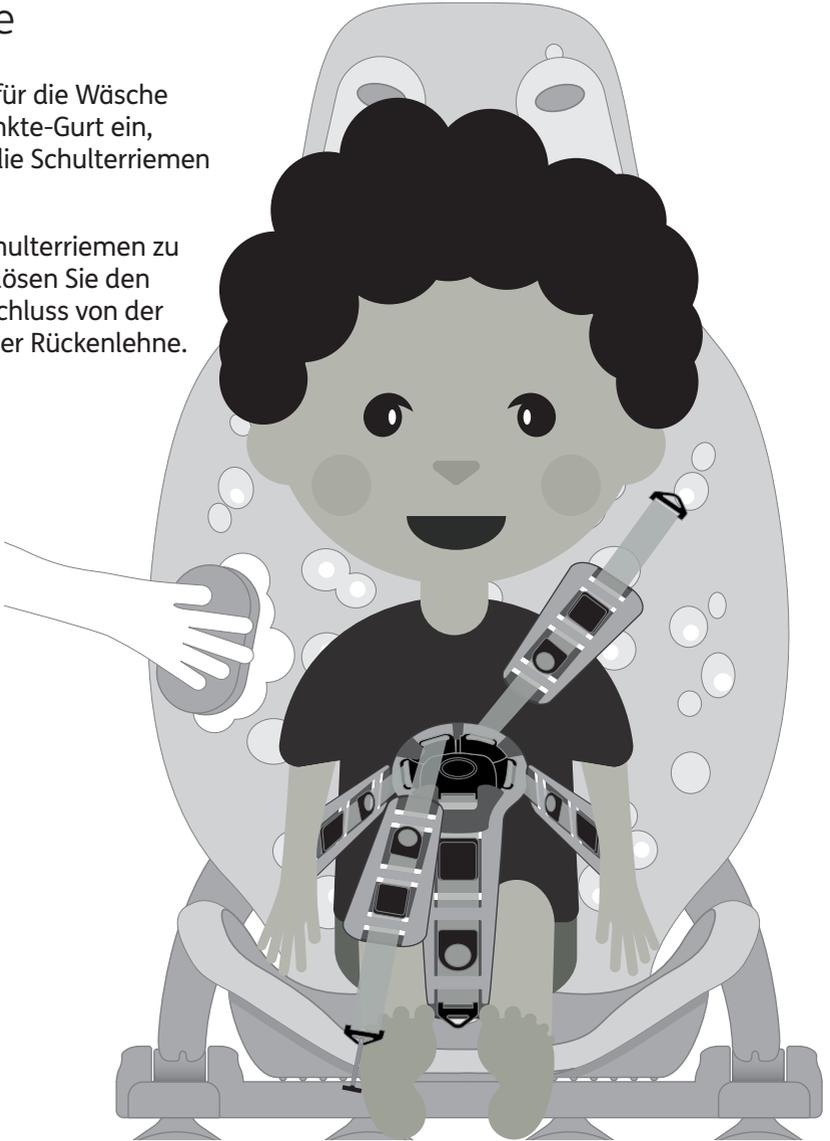


Zur Wäsche der unteren Körperhälfte stellen Sie einen 4-Punkte-Gurt ein, indem Sie den Seitenriemen entfernen.

Um den Seitenriemen zu entfernen, lösen Sie den Knebelverschluss von der Rückenseite der Rückenlehne.

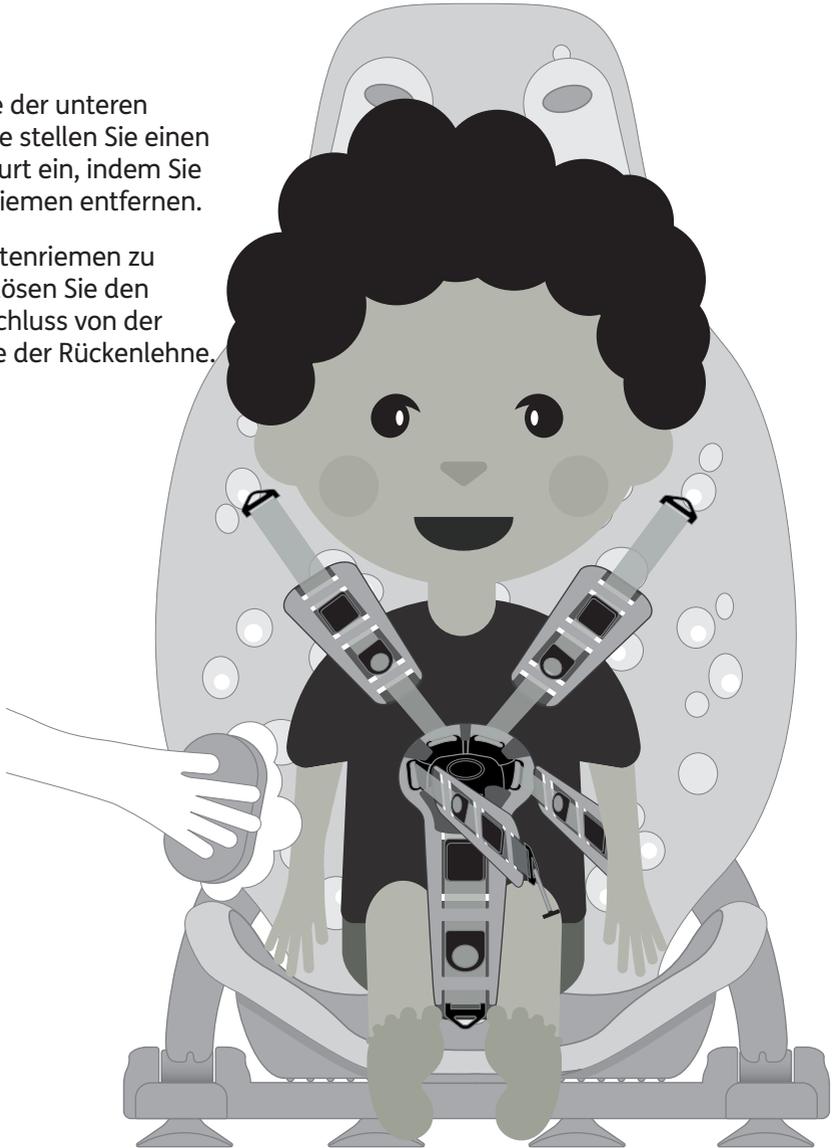

## 11.5 Kürzen der Seiten- und Schulterriemen

Falls ein kleineres Kind den Splashy nutzen sollte, mag es vonnöten sein, die Seiten- und Schulterriemen zu verkürzen.

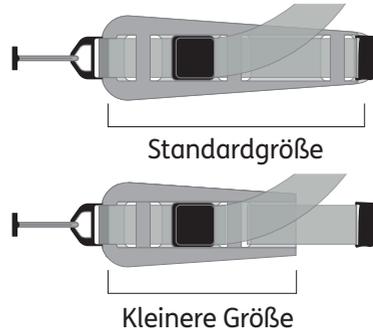


**1** Bei Lieferung Ihres Splashy sehen die Riemen aus wie auf der Abbildung. Um die Riemen zu verkürzen, befolgen Sie bitte diese Anweisungen.




**2** Entfernen Sie die hervorgehobene Sektion des Riemens vom Schaumstoffmaterial.




**3** Falten Sie das dünnere Ende des Schaumstoffes zurück und stellen Sie sicher, dass die Öffnungen übereinanderliegen.

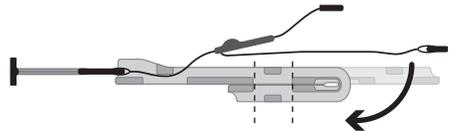

**4** Fädeln Sie den Riemen durch die erste Öffnung des gedoppelten Schaumstoffes.

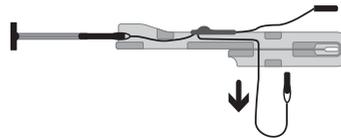


**5** Sobald er komplett durchgezogen ist, fädeln Sie den Riemen durch die zweite Öffnung und ziehen Sie ihn fest.

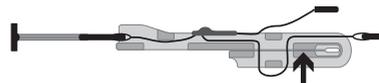

## 11.5.1 Verkleinerung des Leistenteils


Falls ein kleineres Kind den Splashy nutzt, ist es in manchen Fällen notwendig, das Leistenteil zu verkleinern.

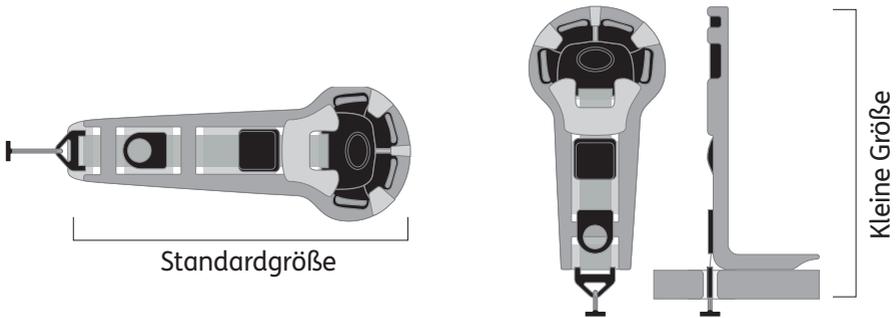

**1** Das Leistenteil sieht bei Lieferung wie folgt aus. Zur Verkleinerung des Leistenteils befolgen Sie bitte folgende Anleitung.

**2** Lösen Sie den hervorgehobenen Bereich des Gurtes vom Schaumstoff.

**3** Klappen Sie den Schaumstoff um, um das Leistenteil zu verkleinern. Stecken Sie den Knebelverschluss zurück in das Loch der Sitzbasis.

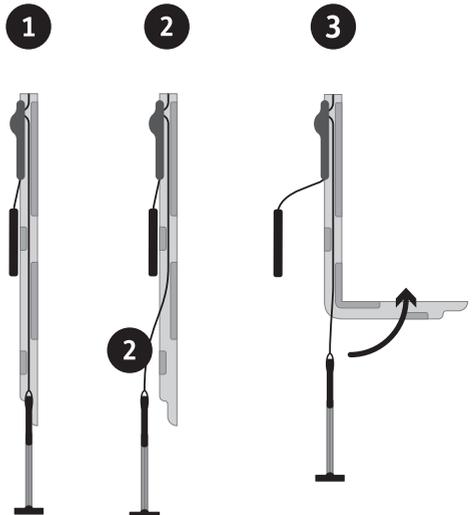

## 11.6 Empfohlene Positionen der Rückenlehne

---

**Aufrechte Position** – Wenn Ihr Kind eine gute Sitztoleranz besitzt sowie über Rumpfkontrolle verfügt, ist eine aufrechte Sitzposition möglich.



**Mittlere Sitzposition** – wir empfehlen Ihnen, während des Hineinhebens Ihres Kindes in den Sitz, die mittlere Sitzposition einzustellen.



**Zurückgelehnte Position** – Falls Ihr Kind in den Badewannensitz gehoben werden muss, empfehlen wir, die Lehne in die komplett zurückgelehnte Position zu stellen.



## 11.6.1 Nutzung der Neigefunktion der Rückenlehne

So bald ihr Kind sicher und gestützt im Splashy sitzt, kann die Neigung der Rückenlehne eingestellt werden.


Gehen Sie bei der Veränderung der Neigung umsichtig vor. Führen Sie diese Bewegung so sanft wie möglich aus, um eventuelle Ängstlichkeit des Kindes zu vermeiden.

Um den Splashy in eine aufrechtere Position zu bringen, legen Sie Ihre Hand auf den Splashy Griff **A** oberhalb der Rückenlehne; die andere Hand legen Sie auf den grünen Klipp an der Armlehne des Floorsitters **B**



Lösen Sie den Klipp und bringen Sie den Badewannensitz in die gewünschte, dem Kind entsprechende, aufrechte Position **A**

Befestigen Sie den Klipp am Floorsitter. Sobald Sie ein Klick hören, ist der Klipp befestigt.

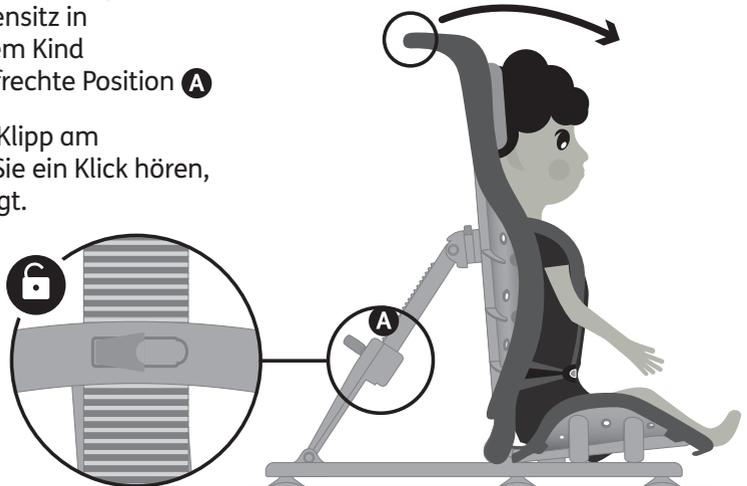


## 11.7 Entfernung des Splashy aus der Badewanne nach dem Baden sowie Demontage

Öffnen Sie die Gurte und heben Sie das Kind aus dem Splashy. Lassen Sie das Badewasser ab.





Mehr Anleitung zur sicheren Nutzung finden Sie unter Abschnitt 9.

Um den Splashy vom Floorsitter zu lösen, drücken Sie den grünen Knopf und drücken Sie die Rückenlehne leicht nach vorne.

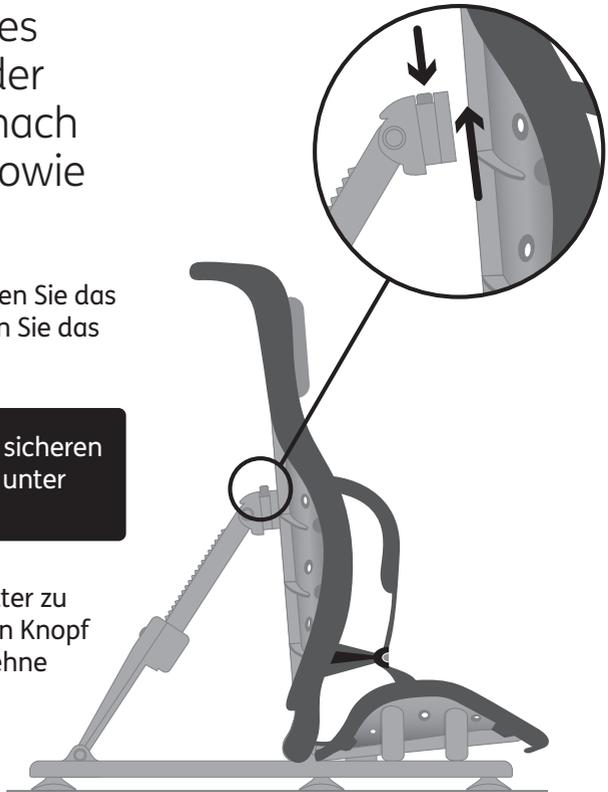


Zur Lösung der Sitzbasis, ziehen Sie am grünen Plastikstreifen **A** und gleiten Sie zurück. Zuletzt heben Sie den Splashy aus der Floorsitter-Plattform heraus **B**

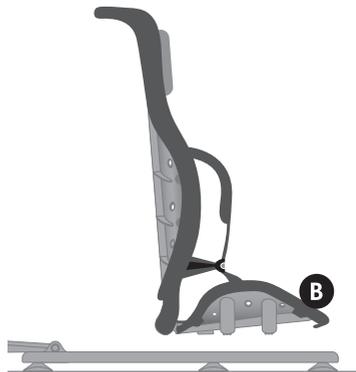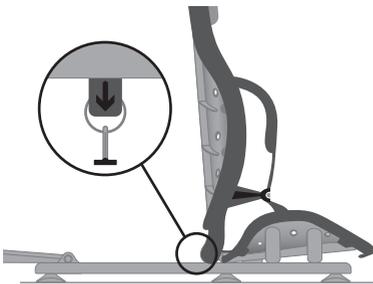


Zur Ablösung der Floorsitter-Plattform von der Badewanne, heben Sie den Rahmen leicht an, um die GummifüÙe abzulösen.

Falls die GummifüÙe sich beim ersten Versuch nicht lösen sollten, wenden Sie bitte keine Kraft an, um diese von der Badewanne zu lösen.

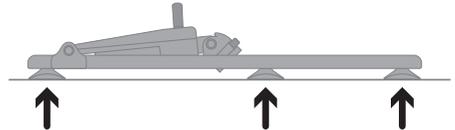

Schieben Sie ihre Hand sanft unter die GummifüÙe und sie werden sich lösen (verwenden Sie kein Werkzeug).

Legen Sie den Splashy seitwärts vor sich und lösen Sie die Sitzbasis von der Rückenlehne, indem Sie durch Zurückklappen der Sitzbasis den Scharniermechanismus lösen.

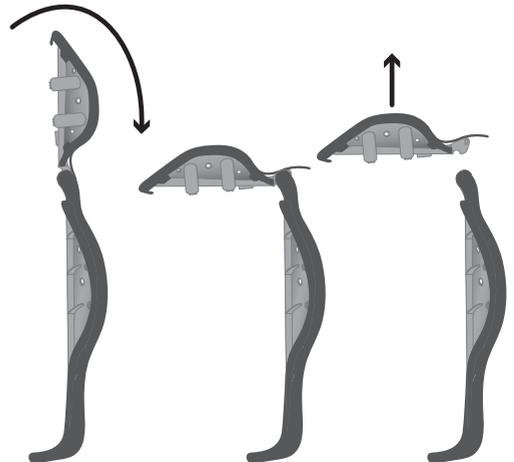

## 11.8 Abtropfen und Trocknen

Bitte wischen und spülen Sie den Splashy ab, bevor Sie ihn abtropfen lassen und verstauen.

Der Floorsitter kann trockengewischt werden (siehe Abschnitt 07).

Die Trocknung geht leichter vonstatten, wenn Sie den letzten Schritt in Abschnitt 11.7 auslassen, d. h., die Sitzbasis, die Rückenlehne und den Floorsitter, entsprechend dem Beispiel unten, in einem Stück belassen.





Um die Bodenstation bei Nichtgebrauch zu verstauen, schieben Sie bitte den Neigungsarm in die unterste Stellung und legen ihn flach, wie unten in Schritt 2 dargestellt.

Drücken Sie den grünen Knopf oberhalb des Rückenlehnenarms und drücken Sie die Rückenlehne nach vorne um den Sitz abzulösen.



Klappen Sie den Rückenlehnenarm, entsprechend des Pfeiles auf der Abbildung, nach vorne.

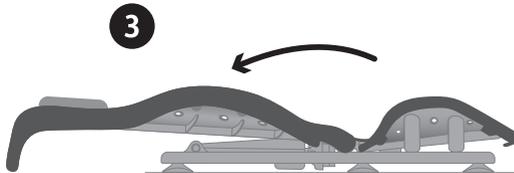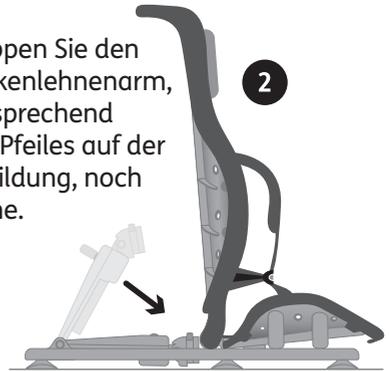


Legen Sie die Rückenlehne wie abgebildet auf dem Floorsitter ab.




Verwenden Sie die Klettbänder um den Floorsitter am Splashy zu befestigen.

## 11.9: Die FüÙe der Bodenstation für den Außenbereich

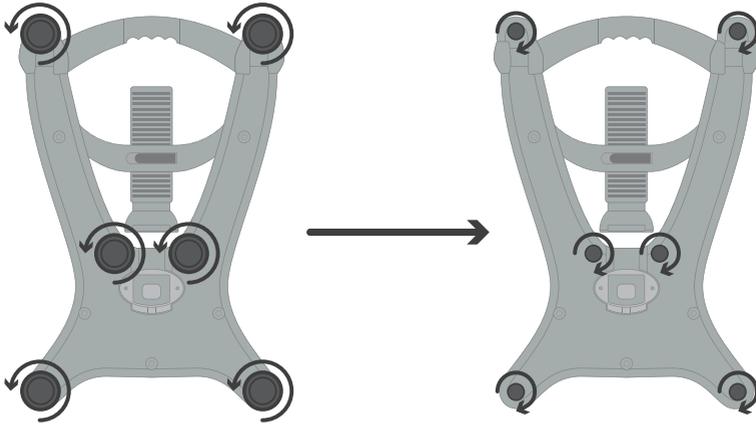

**1** Entfernen Sie die 6 SaugfüÙe von der Bodenstation.

**2** Fügen Sie die FüÙe für den Außenbereich durch Einschrauben im Uhrzeigersinn hinzu.

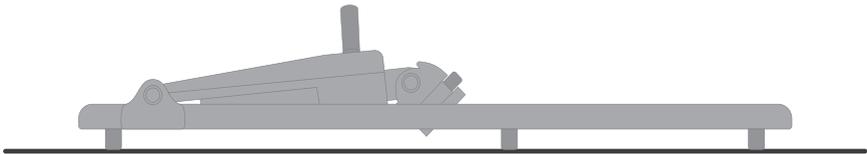

**3** Vergewissern Sie sich, dass alle FüÙe festgeschraubt sind und die Bodenstation flach auf dem Boden liegt.



Verwenden Sie nicht die FüÙe für den Außenbereich in der Badewanne/Dusche. Bitte verwenden Sie die originalen SaugfüÙe der Bodenstation.

## Abschnitt 12: Größeninformationen

<b>Splashy - technische Informationen</b>	
<b>Höhe Sitz-Rückenlehne</b>	385mm
<b>Breite Sitz-Rückenlehne</b>	610mm
<b>Tiefe Sitzbasis</b>	300mm
<b>Breite Sitzbasis</b>	350mm
<b>Breite Floorsitter-Plattform</b>	420mm
<b>Höhe Floorsitter Plattform</b>	630mm
<b>Maximalgewicht</b>	30kg (66lbs)
<b>Alter (voraussichtlich)</b>	1- 8 Jahre

## Abschnitt 13: Tabelle der Symbole

Symbol	Bedeutung
	Medizinprodukt
	Bedienungsanleitung lesen
	CE-Kennzeichnung
	UKCA-Kennzeichnung
	Warnung
	Hersteller
	Seriennummer
	Modellnummer
	Max. Körpergewicht des Benutzers
	Herstellungsdatum
	Latexfrei
	Kennzeichnungssystem „Unique Device Identification“
	Adresse des Importeurs
	Adresse des Bevollmächtigten für die Schweiz



Sunrise Medical AG  
Erlenauweg 17  
CH-3110 Münsingen  
Schweiz/Suisse/Svizzera

Fon +41 (0)31 958 3838  
Fax +41 (0)31 958 3848  
[www.SunriseMedical.ch](http://www.SunriseMedical.ch)



Fireflyfriends Ltd  
19c Ballinderry Road  
Lisburn BT28 2SA  
Northern Ireland

T: (+44) 28 9267 8879  
E: [hello@fireflyfriends.com](mailto:hello@fireflyfriends.com)

[fireflyfriends.com](http://fireflyfriends.com)

